
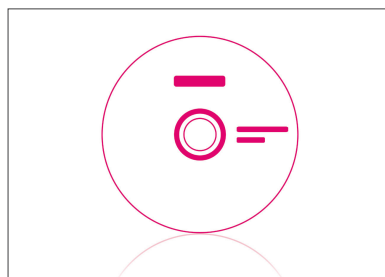
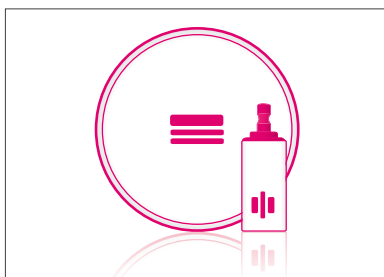
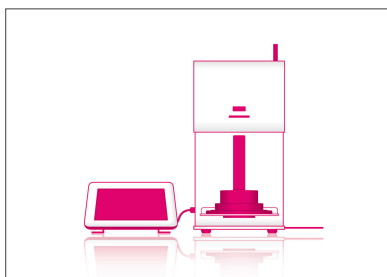
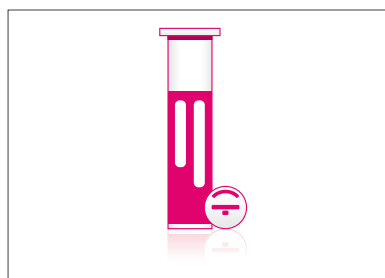
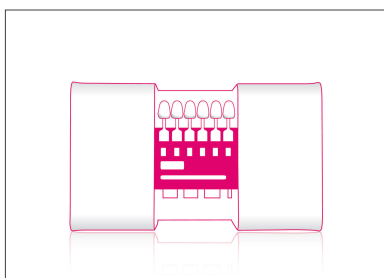



Compendio **VITA** Noviembre 2023

Pulido

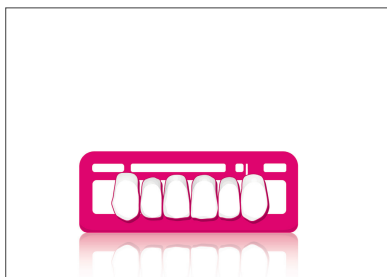

VITA – perfect match.

VITA

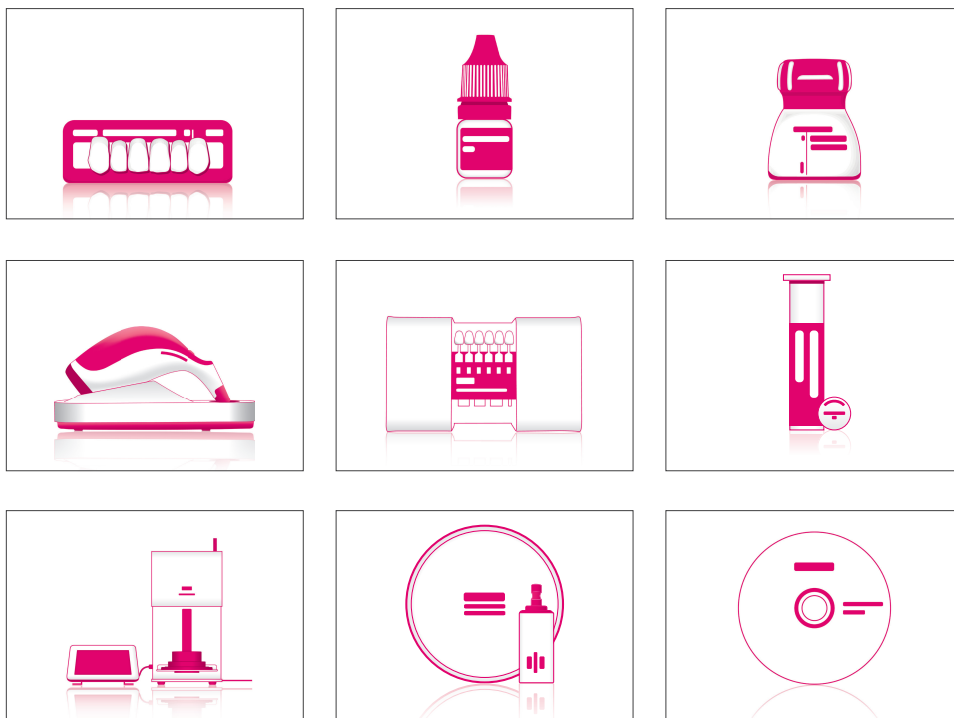

VITA – perfect match.

VITA

VITA CERAMICS Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo de todos los materiales cerámicos



Descripción del producto

Los VITA CERAMICS Polishing Sets se han desarrollado especialmente para el pulido en dos etapas de todos los materiales cerámicos dentales en la clínica y el laboratorio. Cada kit incluye un total de 6 pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo.

Ventajas

Para todas las cerámicas:

Cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de óxido: con un solo kit pueden pulirse todo tipo de cerámicas.

Pulido sencillo, rendimiento excelente:

Los instrumentos se caracterizan por su buen rendimiento de remoción y pulido, incluso en caso de fisuras pronunciadas. Además, los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse para garantizar la seguridad.

Larga vida útil:

Los VITA CERAMICS Polishing Sets ofrecen un rendimiento y una durabilidad excelentes gracias a su elevada proporción de diamante y a su gran volumen útil.

Contenido

VITA CERAMICS Polishing Set clinical:

Consta de un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo. Todos los instrumentos son esterilizables.

VITA CERAMICS Polishing Set technical:

Consta de un total de seis instrumentos para la pieza de mano. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.


VITA CERAMICS Polishing Set Productos

VITA CERAMICS Polishing Set

Denominación	Ref.
VITA CERAMICS Polishing Set clinical	ECEPSETC
VITA CERAMICS Polishing Set technical	ECEPSETT
Instrumento de pulido technical, en forma de lenticular, VI-H15D Pulido de alto brillo (crema), 3 uds.	ERHH16D3
Instrumento de pulido technical, en forma de lenticular, VI-H15Dmf Pulido previo (gris), 3 uds.	ERHH16DMF3
Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-DT-H17D Pulido de alto brillo (crema), 3 uds.	ERHH17D3
Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-DT-H17Dmf Pulido previo (gris), 3 uds.	ERHH17DMF3
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-H1D Pulido de alto brillo (crema), 6 uds.	ERHH1D6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-H1Dmf Pulido previo (gris), 6 uds.	ERHH1DMF6
Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-DT-W14D Pulido de alto brillo (crema), 3 uds.	ERWW14D3
Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-DT-W14Dmf Pulido previo (gris), 3 uds.	ERWW14DMF3
Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-W18D Pulido de alto brillo (crema), 6 uds.	ERWW18D6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-W18Dmf Pulido previo (gris), 6 uds.	ERWW18DMF6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-W7D Pulido de alto brillo (crema), 6 uds.	ERWW7D6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-W7Dmf Pulido previo (gris), 6 uds.	ERWW7DMF6

VITA ENAMIC® Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la cerámica híbrida VITA ENAMIC

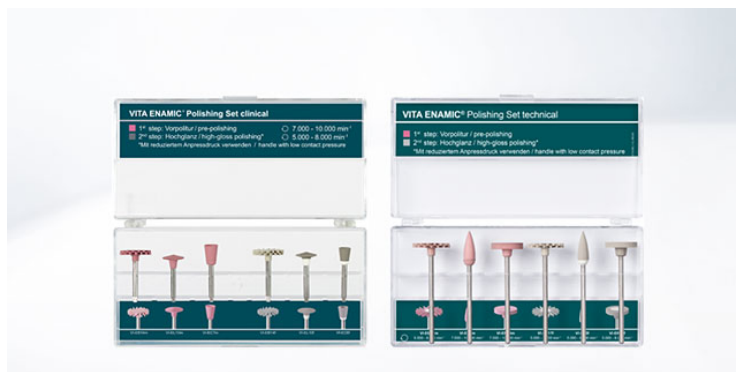

Descripción del producto

Los kits de Instrumento de pulidoes VITA ENAMIC se han desarrollado para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen diversos Instrumento de pulidoes para el pulido previo y el pulido de alto brillo. Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies masticatorias, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

Ventajas

Resultados finales excelentes:

Con estos instrumentos se consiguen unas extraordinarias superficies finales resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

Manipulación sencilla y segura:

Los instrumentos garantizan un elevado rendimiento de pulido. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse, lo que garantiza la seguridad.

Tratamiento respetuoso con el material:

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA ENAMIC se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

Contenido

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza de mano. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC® Polishing Set Productos

VITA ENAMIC® Polishing Set

Denominación		Ref.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-EB17f Pulido de alto brillo (gris), 3 uds.		ERHEB17F3
Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-EB17m Pulido previo (rosa), 3 uds.		ERHEB17M3
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, VI-ER15f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHER15F6
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, VI-ER15m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHER15M6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-ES5f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHES5F6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-ES5m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHES5M6
Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-EB14f Pulido de alto brillo (gris), 3 uds.		ERWEB14F3
Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-EB14m Pulido previo (rosa), 3 uds.		ERWEB14M3
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-EC6f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWEC6F6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-EC7m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWEC7M6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-EL10f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWEL10F6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-EL10m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la VITA SUPRINITY PC



Descripción del producto

Los kits de pulido VITA SUPRINITY han sido desarrollados para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica de silicato de litio reforzada con dióxido de circonio (ZLS) de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen diversos Instrumento de pulidoes para el pulido previo y el pulido de alto brillo.

Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies oclusales, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

Ventajas

Resultados finales excelentes:

Con estos instrumentos se consiguen unas superficies finales impecables y resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

Manipulación sencilla y segura:

Los instrumentos permiten un control excelente del rendimiento de pulido, acompañado de un escaso desgaste propio. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Además, los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse, garantizándose así la seguridad.

Tratamiento respetuoso con el material:

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA SUPRINITY PC se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

Contenido

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Incluye un total de ocho instrumentos para la pieza de mano. Incluye cuatro instrumentos para el pulido previo y cuatro para el pulido de alto brillo.

VITA SUPRINITY® Polishing Set Productos

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Denominación		Ref.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Instrumento de pulido technical, lenticular, L16f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHL16F6
Instrumento de pulido technical, lenticular, L16m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHL16M6
Instrumento de pulido technical, longpin, LPf Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHLPF6
Instrumento de pulido technical, longpin, LPm Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHLPM6
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, R15f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHR15F6
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, R15m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHR15M6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, S5f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHS5F6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, S5m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHS5M6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, C6f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWC6F6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, C6m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWC6M6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, L10f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWL10F6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, L10m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWL10M6
Instrumento de pulido clinical, en forma de punta, S4f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWS4F6
Instrumento de pulido clinical, en forma de punta, S4m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWS4M6

Pastas de pulido VITA

Pastas de pulido de diamante para el pulido extraoral de alto brillo de materiales cerámicos y con contenido de polímeros.



Descripción del producto

VITA Polish Hybrid es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de cerámica híbrida VITA ENAMIC, composite y polímero.

VITA Polish Cera es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de los siguientes materiales de cerámica dental: cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de dióxido de circonio.

Ventajas

- Ambas pastas de pulido posibilitan un resultado de alto brillo rápido y seguro, a la vez que preservan la textura superficial.
- Las partículas de diamante están específicamente adaptadas a las respectivas clases de material. De este modo se trata la superficie y se reduce la probabilidad de acumulaciones de placa.

Contenido


La pasta de pulido VITA Polish Hybrid es idónea para el pulido de cerámica híbrida VITA ENAMIC en combinación con los pulidores de los VITA ENAMIC Polishing Sets clinical y technical.

La pasta de pulido VITA Polish Cera es idónea para el pulido de VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA y VITA YZ en combinación con los pulidores de los VITA SUPRINITY Polishing Sets clinical y technical.

Pastas de pulido VITA Productos

Pastas de pulido VITA

Denominación		Ref.
VITA Polish Cera, 18 g		B459
VITA Polish Hybrid, 12 g		C020

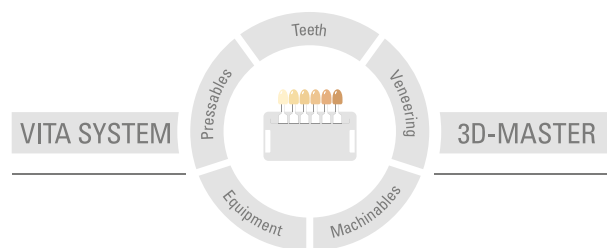

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 11.2023

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik