
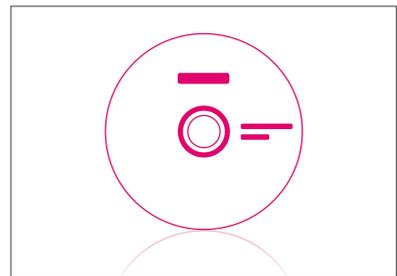
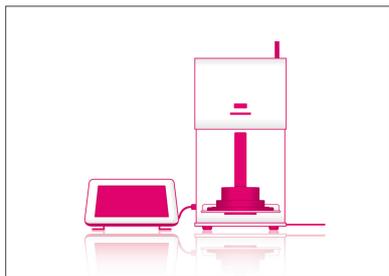
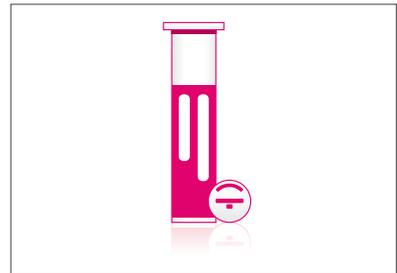


Compendio VITA Febbraio 2021

Protesi rimovibile

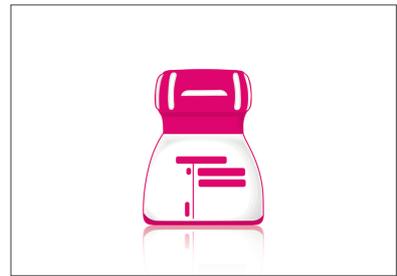

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITAPAN EXCELL® Anterior

Forme, colori e gioco di luci vividi e brillanti



Descrizione

denti anteriori di classe Premium, traslucenti, corposi e di grande vitalità in composito MRP.

Vantaggi

- semplice realizzazione di protesi altamente estetiche grazie a forme vivaci con proporzioni „auree“
- brillante gioco di colori e di luci grazie alla luminosità dinamica e all'andamento cromatico armonioso
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- configurazione gengivale perfetta grazie all'area cervicale ampiamente dimensionata

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentale corposa e naturale per risultati brillanti
- caratteristiche incisali marcate per una vivacità particolare
- liste palatali larghe per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali

Caratteristiche particolari

- quota di smalto pronunciata per una buona trasmissione della luce
- tessitura superficiale ricca di sfaccettature per una distribuzione e riflessione naturale della luce.
- mammelloni / opalescenza integrati per faccette cromatiche naturali
- stratificazione 3D per una transizione cromatica armoniosa

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- Protesi totali e parziali
- Protesi implantari

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 11 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER®: 0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1 – D4 (senza B1)

File

- 17 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 5 x anteriori inferiori

VITAPAN EXCELL® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN EXCELL

- X-Small*: 67 file / 402 anteriori
- Small*: 134 file / 804 anteriori
- Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
- Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN EXCELL

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN EXCELL Anterior

VITAPAN PLUS® Anterior

Per una protesi giovanile e vitale con un Plus di traslucenza



Descrizione

Denti anteriori di grande vitalità, classe Premium, in composito MRP con un Plus di traslucenza.

Vantaggi

- vivace gioco di luci
traslucenza straordinaria grazie all'elevata quota di smalto
- semplice riproduzione della giovinezza estetica
grazie a forme dei denti corpose, vitali e giovanili
- resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentale corposa e giovanile per una „protesi giovane“
- marcate caratteristiche incisali giovanili per un'elevata vivacità
- liste palatali larghe per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali

Caratteristiche particolari

- alta proporzione di smalto / liste marginali traslucenti per una buona dinamica luminosa
- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci vitale
- struttura dei mammelloni integrata e bordo incisale bianco per un effetto cromatico naturale
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi totali e parziali con estetica giovanile
- protesi implantari

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 18 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 6 x forme anteriori inferiori

VITAPAN PLUS® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN PLUS

- X-Small*: 67 file / 402 anteriori
- Small*: 134 file / 804 anteriori
- Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
- Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN PLUS

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN PLUS Anteriori
- VITAPAN PLUS Anteriori e VITAPAN LINGOFORM Posteriori

VITAPAN® LINGOFORM Posterior

Per tutti i concetti protesici, grazie al design oclusale multifunzionale



Descrizione

Denti posteriori multifunzionali, classe Premium, in composito MRP.

Vantaggi

- montaggio semplice e intuitivo grazie all'individuazione „automatica“ della centrica per il design della superficie oclusale che segue il principio delle ruote dentate
- affidabilità universale utilizzabile per tutti i concetti protesici grazie al design oclusale multifunzionale
- montaggio veloce senza estesi interventi di molaggio selettivo grazie alla centrica definita esattamente
- resistenza eccellente grazie a elevata caricabilità, stabilità all'abrasione e funzione sostenuta dalla centrica
- buona lavorabilità grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria corposa con dimensioni lingo-buccali simili al modello naturale
- design della superficie oclusale multifunzionale con contatti di centrica definiti

Caratteristiche particolari

- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci naturale
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi totali e parziali
- protesi implantari

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per: concetti di occlusione lingualizzata

Colori

- 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1 – 5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1 – D4 (senza B1)

File

- 4 x forme posteriori superiori
- 4 x forme posteriori inferiori

VITAPAN® LINGOFORM Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN LINGOFORM

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN LINGOFORM

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN LINGOFORM Posteriori

VITA PHYSIODENS® Anterior

Per una protesi fedele nei dettagli con gioco di forme multistrato



Descrizione

Denti anteriori di classe Premium, corposi come in natura, in composito MRP.

Vantaggi

- integrazione ottimale nella dentatura residua grazie a forme multistrato, fedeli nel dettaglio
- gioco di luci naturale grazie ad una tessitura superficiale ricca di sfaccettature
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua grazie alla corrispondenza ottimale con la scala colori e all'ampia gamma di colori
- mascheramento sicuro di strutture secondarie/terziarie grazie all'elevato volume dentale (basale)
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria corposa come in natura per una buona integrazione nella dentatura residua
- caratteristiche incisali marcate e vitali e curvatura labiale simile al dente naturale
- area cervicale larga per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali
- elevato volume (basale) per il mascheramento di strutture secondarie/terziarie

Caratteristiche particolari

- cromaticità esatta per un buon mascheramento di strutture terziarie
- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci naturale
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi parziali
- scheletrati, strutture con attacchi e a barra
- lavori telescopici e conometrici

Concetti di protesi

Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr. E. End

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 21 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 8 x forme anteriori inferiori

VITA PHYSIODENS® Anterior Assortimenti

VITA PHYSIODENS tooth storage

Anterior:

- X-small*: 67 Sets / 402 Anteriors
- Small*: 134 Sets / 804 Anteriors
- Medium*: 268 Sets / 1608 Anteriors
- Large*: 400 Sets / 2400 Anteriors

Available in VITA classical A1–D4® and VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades.**

*) Note: You will receive the most frequently used moulds and shades with the packaged tooth storage. We are also happy to put together storage systems according to your individual specifications.

**) see available shades

Campionario forme VITA PHYSIODENS

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori

VITA PHYSIODENS® Posterior

Per la riproduzione ottimale della funzione grazie alla morfologia naturale



Descrizione

Denti posteriori classe Premium, corposi come in natura, in composito MRP.

Vantaggi

- semplice ripristino della funzione masticatoria naturale grazie a superfici occlusali con morfologia naturale
- individuazione intuitiva della centrica e buona intercuspidação grazie ad un design occlusale supportato dalla centrica
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
- mascheramento sicuro di strutture terziarie grazie all'elevato volume dentale (basale)
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria corposa basata sulle dimensioni dei denti naturali
- rilievi delle superfici occlusali/cuspidi completamente anatomici secondo il modello naturale

Caratteristiche particolari

- elevato volume (basale)
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa $> 30^\circ$
- configurazione delle fessure fedele nel dettaglio

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi parziali
- scheletrati, strutture con attacchi e a barra
- lavori telescopici e conometrici

Concetti di protesi

Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr. E. End

Colori

- 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 6 x forme posteriori superiori
- 6 x forme posteriori inferiori

VITA PHYSIODENS® Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITA PHYSIODENS

Posteriori:

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITA PHYSIODENS

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori

VITA LUMIN® VACUUM Anterior



Descrizione

I denti in ceramica sono utilizzabili per tutte le indicazioni della protesi parziale e totale High Premium. Presentano un'elevata brillantezza grazie all'intrinseco effetto Lumin; conducibilità della luce, opalescenza e fluorescenza corrispondono a quelle dei denti naturali. I denti realizzati a mano in Germania sono dotati inoltre di elementi di ancoraggio meccanico per le basi di protesi, che conferiscono stabilità nel lungo periodo:

- Denti anteriori con perno rivestito d'oro inserito nel nucleo in ceramica dura

Materiale

I denti anteriori e posteriori sono realizzati nell'affermata ceramica feldspatica al quarzo VITA, presentano una elevata resistenza meccanica e all'abrasione, lunga durata e per le caratteristiche del materiale sono particolarmente indicati per pazienti con allergia al MMA.

Selezione

Anteriori

20 forme superiori:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 forme inferiori:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriori

3 forme SYNOFORM superiori / inferiori:

10S, 11S, 13S

3 forme CUSPIFORM superiori / inferiori:

40C, 41C, 44C

Colori

10 x colori VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Colori supplementari hanno un tempo di consegna.

Combinabilità

I denti anteriori VITA LUMIN VACUUM sono ottimali per entrambe le linee di denti posteriori VITA LUMIN VACUUM.


VITA LUMIN® VACUUM Anterior Assortimenti

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Forme	Pz. per fila	Denominazione
20	6	Anteriores superiori
6	6	Anteriores inferiori

* nei colori VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

VITA LUMIN® VACUUM Posterior

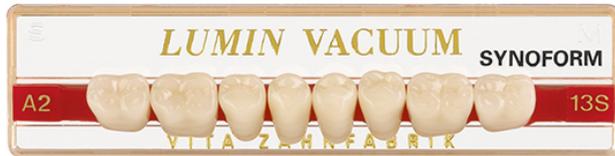

Descrizione

I denti in ceramica sono utilizzabili per tutte le indicazioni della protesi parziale e totale High Premium. Presentano un'elevata brillantezza grazie all'intrinseco effetto Lumin; conducibilità della luce, opalescenza e fluorescenza corrispondono a quelle dei denti naturali. I denti realizzati a mano in Germania sono dotati inoltre di elementi di ancoraggio meccanico per le basi di protesi, che conferiscono stabilità nel lungo periodo:

- Denti posteriori con cavità in sottosquadro

Materiale

I denti anteriori e posteriori sono realizzati nell'affermata ceramica feldspatica al quarzo VITA, presentano una elevata resistenza meccanica e all'abrasione, lunga durata e per le caratteristiche del materiale sono particolarmente indicati per pazienti con allergia al MMA.

Selezione

Anteriori

20 forme superiori:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 forme inferiori:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriori

3 forme SYNOFORM superiori / inferiori:

10S, 11S, 13S

3 forme CUSPIFORM superiori / inferiori:

40C, 41C, 44C

Colori

10 x colori VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Colori supplementari hanno un tempo di consegna.

Combinabilità

I denti anteriori VITA LUMIN VACUUM sono ottimali per entrambe le linee di denti posteriori VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Posterior Assortimenti

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Forme	Pz. per fila	Denominazione
3	8	Posteriores Synoform superiori
3	8	Posteriores Synoform inferiori
3	8	Posteriores Cuspiform superiori
3	8	Posteriores Cuspiform inferiori

VITAPAN® Anterior

Per tutti i casi grazie all'ampia varietà di colori e forme



Descrizione

Denti anteriori universali con forme pronunciate e funzionali all'età, in composito MRP.

Vantaggi

- semplice realizzazione di protesi totali / parziali funzionali all'età
grazie alla varietà di forme pronunciate e funzionali all'età
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua
grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
- effetto cromatico naturale
grazie all'andamento cromatico 3D integrato dall'area cervicale al bordo incisale
- resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria pronunciata e funzionale all'età per protesi totali / parziali
- bordo incisale piatto, con abrasioni come in natura
- area cervicale stretta

Caratteristiche particolari

- equilibrio armonioso tra croma e traslucenza
- tessitura superficiale uniforme, caratteristica dei pazienti anziani
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi totali e parziali
- gerontoprotesi
- protesi in situazioni di spazio limitato

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 31 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 13 x forme anteriori inferiori

VITAPAN® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN

- X-Small*: 67 file / 402 anteriori
- Small*: 134 file / 804 anteriori
- Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
- Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN Anteriori

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior

Per il semplice ripristino della funzione masticatoria in protesi totale / parziale



Descrizione

Denti posteriori sottili con rilievo occlusale pronunciato, in composito MRP.

Vantaggi

- semplice ripristino della funzione masticatoria in protesi totale / parziale
grazie al pronunciato rilievo occlusale per una buona identificazione della centrica e intercuspidação
- resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria fine e sottile che lascia ampio spazio libero per la lingua e consente masticazione efficace
- rilievo pronunciato delle superfici occlusali / cuspidi per una buona identificazione della centrica e intercuspidação

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi totali e parziali
- protesi in situazioni di spazio limitato

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per concetti di occlusione buccale

Colori

- 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 6 x anteriori superiori
- 6 x forme posteriori inferiori

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN CUSPIFORM

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN CUSPIFORM

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN CUSPIFORM Posteriori

VITAPAN SYNOFORM® Posterior

Per una valida funzione in gerontoprotesi grazie al rilievo occlusale piatto



Descrizione

Denti posteriori sottili con rilievo occlusale piatto in composito MRP.

Vantaggi

- semplice ripristino della funzione masticatoria in gerontoprotesi grazie al rilievo occlusale piatto per un'ampia libertà di movimento
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria fine e sottile che lascia uno spazio libero più ampio per la lingua
- rilievo delle superfici occlusali / cuspidi ridotto e piatto per ampie possibilità di movimento

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 6°
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- gerontoprotesi

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 5 x anteriori superiori
- 5 x forme posteriori inferiori

VITAPAN SYNOFORM® Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN SYNOFORM

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4@**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN SYNOFORM

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN SYNOFORM Posteriori

VITA MFT® Anterior

Per una solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale



Descrizione

Denti anteriori Basic in polimero HC per solide protesi standard.

Vantaggi

- realizzazione sicura di una valida protesi estetica grazie a caratteristiche incisali e angolari con conformazione secondo il modello naturale
- agevole riproduzione di giochi di luci naturali grazie ad un rapporto equilibrato tra dentina e smalto, mammelloni e tessitura integrati
- riproduzione affidabile del colore grazie ad una buona fedeltà cromatica allo standard di colore VITA (VITA classical A1–D4®)

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentaria universale con conformazione secondo il modello naturale
- design incisale di forma elegante e conformazione secondo il modello naturale

Caratteristiche particolari

- rapporto equilibrato smalto-dentina per un gioco di luce naturale
- tessitura superficiale ricca di sfumature con mammelloni integrati
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

- solide soluzioni standard per protesi totale / parziale

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 13 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 x colori VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

File

- 12 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 5 x forme anteriori inferiori

VITA MFT® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITA MFT

Magazzino 2S:

- 72 file / 432 anteriori*
- 48 file / 384 posteriori*

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITA MFT

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA MFT Anteriori

VITA MFT® Posterior

Per tutti i concetti protesici, grazie al design oclusale multifunzionale



Descrizione

Denti posteriori Basic in polimero HC con superfici oclusali funzionalmente ottimizzate.

Vantaggi

- montaggio protesico semplificato grazie a punti di contatto predefiniti che assicurano un'intercuspidazione automatica
- elevata sicurezza di montaggio grazie alle superfici oclusali funzionalmente ottimizzate per una centrica guidata
- interventi di molaggio ridotti grazie al design basale ottimizzato
- uso universale e sicuro per tutti i concetti protesici, grazie al design oclusale multifunzionale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentaria universale con estensione lingo-buccale naturale
- design oclusale multifunzionale con punti di contatto predefiniti

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Indicazioni

- solide soluzioni standard per protesi totale / parziale

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per: concetti di occlusione buccale e lingualizzata

Colori

- 12 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 x colori VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

File

- 3 x forme posteriori superiori
- 3 x forme posteriori inferiori

VITA MFT® Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITA MFT

Magazzino 2S:

- 72 file / 432 anteriori*
- 48 file / 384 posteriori*

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITA MFT

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA MFT Posteriori

VITA VIONIC® WAX



Descrizione

Dischi in cera per l'esecuzione del montaggio in cera.

Vantaggi

- confortevole prova del montaggio in cera grazie alla realizzazione CAD/CAM di protesi a formato pieno, in cera bianca
- montaggio in cera preciso grazie a cavità fresate esattamente secondo la progettazione digitale
- correzione agevole perchè il montaggio in cera può essere modificato durante la prova

Caratterizzazione

VITA VIONIC WAX

- dischi in cera sintetica di forma stabile, resistenti alla temperatura

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi digitali

Colori

- Pink (rosa)
- White (bianco)

VITA VIONIC® WAX Articoli

VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADP9830
White, Ø 98.4 x h 30 mm	ADW9830

VITA VIONIC® BASE



Descrizione

Disco in PMMA per la realizzazione di basi di protesi definitive.

Vantaggi

- efficiente realizzazione della base grazie al processo CAD/CAM senza messa in rivestimento manuale e pressatura
- semplice riproducibilità perchè il sistema consente il rifacimento della base con il solo clic del mouse
- eccellente adattamento alla cresta alveolare grazie alla realizzazione CAD/CAM della base senza fase di polimerizzazione

Caratterizzazione

VITA VIONIC BASE

- dischi in PMMA ad elevata reticolazione, polimerizzati industrialmente
- dischi in materiale omogeneo con stabilità di forma e colore ottimale

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi digitali

Colori

- Orange-Pink (arancio-rosa)
- Deep-Pink (rosa scuro)
- Light-Pink (rosa chiaro)

VITA VIONIC® BASE Articoli

VITA VIONIC® BASE

VITA VIONIC BASE, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADDP9826
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADDP9830
Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADLP9826
Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADOP9826
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADOP9830

VITA VIONIC® BOND



Descrizione

Soluzione per il fissaggio di denti protesici nella VITA VIONIC BASE.

Vantaggi

- efficiente fissaggio adesivo di denti protesici senza dispendioso procedimento di polimerizzazione a caldo/freddo
- fissaggio preciso, privo di fessure dei denti nella cavità grazie al sistema di fissaggio a bassa viscosità, autopolimerizzante
- legame sicuro tra denti protesici e base grazie alla soluzione di fissaggio specifica

Caratterizzazione

VITA VIONIC BOND

- sistema di fissaggio bicomponente, autopolimerizzante a base MMA
- consistenza fluida per un'applicazione precisa sulle superfici di adesione
- crea uno strato reattivo all'interfaccia con le superfici di adesione per un legame sicuro

Indicazioni

Soluzione ottimale per:

- protesi digitali VITA VIONIC

Contenuto

Contenuto VITA VIONIC BOND Kit

- VITA VIONIC BOND I, vasetto, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, flacone, 1 ml
- Microbrush, 3 pz.

VITA VIONIC® BOND Assortimenti


VITA VIONIC® BOND

**VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush

VITA VIONIC® FRAME

Per l'efficiente realizzazione CAD/CAM di protesi con Ceramill® Motion 2

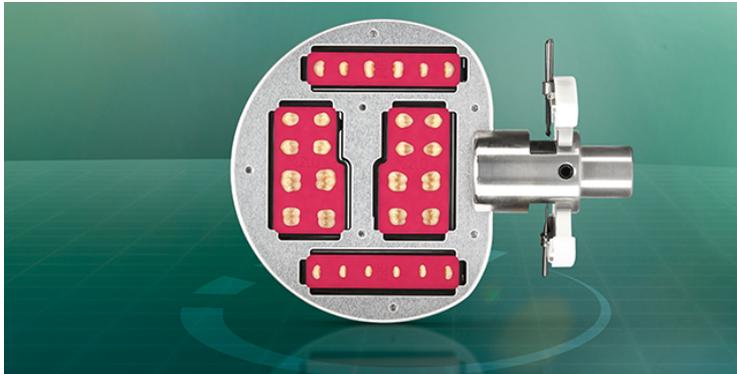

Descrizione

VITAPAN EXCELL DD FRAME
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

Vantaggi

- semplice ricostruzione digitale della funzione individualizzata secondo diversi concetti e con integrazione delle classi di Angle
- completamento efficiente di protesi totali grazie alla modifica basale dei denti con un semplice clic, come per la progettazione protesica
- realizzazione CAD/CAM completamente digitale, sicura grazie al sistema di materiali coordinati incl. soluzione di fissaggio

Caratteristiche dei denti

DD FRAME per sistema di supporto Ceramill D-Set

- serve per la lavorazione CAM di denti protesici posizionati in un apposito telaio
- consente la tecnica fresaggio per le parti dentali basali e circolari

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- Realizzazione di protesi parziali e totali

Concetti di protesi

Analisi del modello CAD:

- analisi sec. TiF con modulo software ceramill d-flow

Montaggio protesico CAD:

Opzioni di progettazione specifiche VITA consentono

- attuazione dei concetti di montaggio: buccale, linguale, morso incrociato e sec. il Prof. Dr. A. Gerber
- integrazione di situazioni occlusali (normocclusione / morso incrociato)
- integrazione di tutte le classi di Angle

Colori

- 6 x colori VITA classical A1–D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

File

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 x forme anteriori superiori*
- 4 x forme anteriori inferiori*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 x forme posteriori superiori*
- 4 x forme posteriori inferiori*

*) Per ogni fila sup./inf. è previsto uno speciale telaio con denti integrati.

VITA VIONIC VIGO®

La nuova generazione di denti per la produzione digitale di protesi con un clic



Descrizione

VITA VIONIC VIGO è una generazione completamente nuova di denti in polimero SE con un design dentale perfezionato per la realizzazione digitale di protesi.

Vantaggi

- Incremento della produttività
Realizzazione economica senza alcun intervento manuale/ rifinitura CAM grazie ad un design dentale perfezionato per il workflow digitale
- Finalizzazione senza perdite di tempo
Finalizzazione veloce della protesi mediante fissaggio adesivo nella base dei denti già sabbiati cervicalmente, senza altri interventi
- Naturalezza con un semplice clic
Riproduzione efficiente della natura con denti preconfezionati con forme/ giochi di luce vitali e montaggi protesici digitali accessibili direttamente
- Sicurezza di processo
Realizzazione digitale sicura grazie ad un sistema di materiali coordinati, inclusa una soluzione esclusiva per il fissaggio preciso dei denti

Caratteristiche dei denti

Forme

- consente una riproduzione dettagliata della forma del dente e della papilla grazie alla conformazione corposa e vitale con liste palatali pronunciate

Caratteristiche particolari

- offre una buona dinamica di luce con eccellente traslucenza, opalescenza e fluorescenza grazie alla stratificazione con struttura 3D e alla pigmentazione romantica.
- presenta un gioco di luci molto naturale grazie alla tessitura superficiale ricca di sfumature

Indicazioni

Per una produzione digitale ad alta efficienza di protesi totali con i consueti sistemi aperti CAM e di stampa 3D

Concetti di protesi

- opzioni illimitate di design personalizzato grazie alle biblioteche VITA con la più ampia gamma di concetti di montaggio che includono classe/posizione (buccale, linguale, morso incrociato, Prof. Dr. A. Gerber)

Colori

VITA classical A1–D4®-/colori Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

File

- 8 x forme anteriori superiori
- 4 x forme anteriori inferiori
- 4 x forme posteriori superiori & inferiori

Adesivo VITACOLL®

Adesivo per denti in resina



Descrizione

VITACOLL realizza l'adesione affidabile tra denti in resina e materiale per basi. Per la molteplicità dei diversi materiali per basi di protesi, l'odontotecnico responsabile ha spesso difficoltà a riconoscere se questi materiali si uniscono in modo ineccepibile con i denti in resina di sua scelta. Con l'uso di VITACOLL si ha questa sicurezza.

Flacone da 100 ml

Vantaggi

L'adesivo VITACOLL realizza un legame chimico affidabile tra denti in resina e materiali polimerizzabili a caldo e a freddo, nonché materiali iniettabili a base di polimetilmetacrilato, evitando il distacco dei denti dalla base della protesi.

Adesivo VITACOLL® Articoli

Adesivo VITACOLL®

Denominazione	Cod.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

Isolante al silicone VITAFOL® H

Per la protezione di denti in resina e ceramica durante la realizzazione della protesi



Descrizione

VITAFOL H è un isolante al silicone per la protezione di denti in resina e ceramica in fase di realizzazione della protesi.

Vantaggi

- VITAFOL H serve per la protezione di denti in resina e ceramica. Fini modellazioni gengivali restano integre, parti ricoperte con VITAFOL H pulite e non devono più essere rifinite.
- Le parti ricoperte con VITAFOL H non devono più essere isolate rispetto al gesso. In tal modo si evita che l'isolante possa giungere sulle superfici basali dei denti. Nei denti in resina è così possibile evitare la formazione di uno strato di separazione tra denti e materiale per basi.
- Con VITAFOL H i denti sono protetti durante la pressatura e lo smuffolamento.

Isolante al silicone VITAFOL® H Assortimenti

Isolante al silicone VITAFOL® H



Assortimento triplo VITAFOL H A9FG*

Quantità	Contenuto	Materiale
3	70 ml	VITAFOL H pasta
3	15 ml	VITAFOL H indurente
3	80 g	VITAFOL H cristalli adesivi
1	pz.	blocco di miscelazione
1	pz.	pennello
		istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 300 protesi da 14 denti



Assortimento laboratorio VITAFOL H A9FL*

Quantità	Contenuto	Materiale
1	70 ml	VITAFOL H pasta
1	15 ml	VITAFOL H indurente
1	80 g	VITAFOL H cristalli adesivi
1	pz.	blocco di miscelazione
1	pz.	pennello
		istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 100 protesi da 14 denti

Isolante al silicone VITAFOL® H Articoli

Isolante al silicone VITAFOL® H

Denominazione	Cod.
VITAFOL H liquido indurente, 15 ml	A9F15
VITAFOL H cristalli adesivi, 80 g	A9F50
VITAFOL H pasta, 70 ml	A9F90
VITAFOL H blocco di miscelazione stampato, 50 fogli	A9FA
VITAFOL H pennello Nr. 11	A9FP

Mobiletto denti vario

Sistema modulare in resina



Descrizione

Il mobiletto denti VITA vario offre ampie possibilità di immagazzinaggio, occupa poco spazio ed è la soluzione ottimale per la conservazione di tutti i magazzini di denti VITA.

Il mobiletto si basa su un sistema modulare di nuovo tipo, può essere ampliato in ogni momento con cassette supplementari ed è realizzato in un polimero color grigio neutro, di elevata qualità e resistenza.

I cassette scorrono agevolmente e possono essere estratti completamente grazie alle guide telescopiche bilaterali.

Il mobiletto denti VITA vario è parte del sistema VITA Modulbox, e quindi compatibile con tutti gli elementi modulari.

Selezione

Capacità per ogni cassetto:


72 x 6 = 432 Anteriori in file da 6

48 x 8 = 384 Posteriori in file da 8

Mobiletto denti vario Articoli

Mobiletto denti vario

Denominazione	Cod.
Mobiletto S10 con 10 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Mobiletto S12 con 12 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Mobiletto S2 con 2 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Mobiletto S4 con 4 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Mobiletto S6 con 6 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Mobiletto S8 con 8 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8

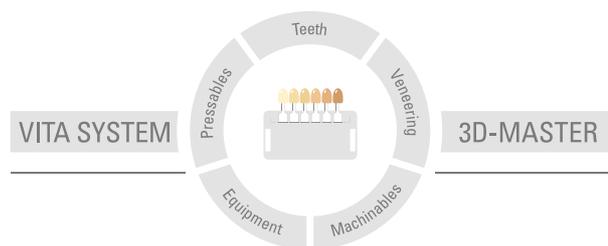

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 02/2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik