
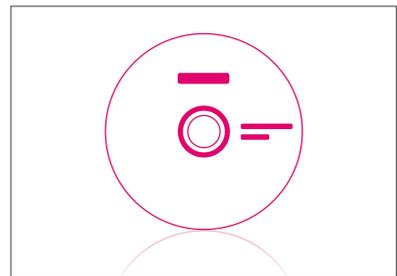
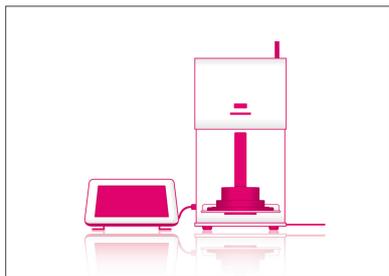
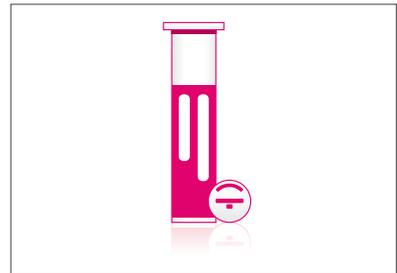



Compendium VITA Février 2021

Prothèse amovible

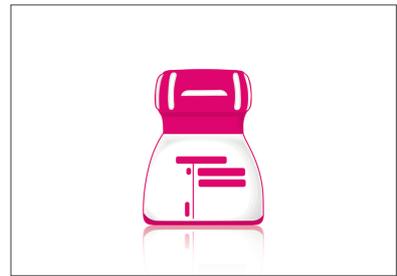

VITA – perfect match.

VITA

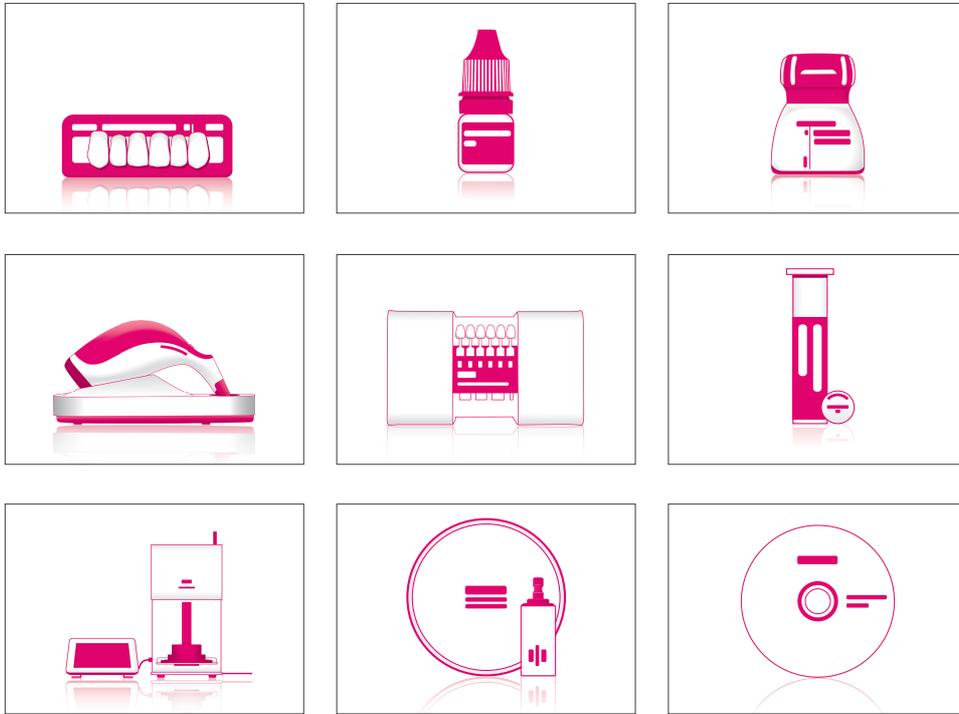

VITA – perfect match.

VITA

VITAPAN EXCELL® Anterior

Vitalité brillante dans la forme, la couleur et le jeu de lumière



Description du produit

Dents antérieures haut de gamme en composite MRP diversifiées, pleines et vivantes.

Avantages

- Fabrication simple de prothèses hautement esthétiques grâce à des formes de dents vivantes aux proportions parfaites
- Jeu de couleur et de lumière brillant grâce à une excellente dynamique de lumière et à un dégradé de couleur harmonieux
- Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles résiduelles grâce à la meilleure fidélité chromatique au teintier
- Excellente durabilité grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
- Modelage gingival de première classe grâce au large collet dentaire

Caractéristique

Rendu de la forme

- géométrie pleine et vivante des dents pour des résultats brillants
- caractéristiques du bord libre distinctes pour une vitalité particulière
- larges crêtes palatines pour une conception papillaire / interdentaire idéale

Caractéristiques spéciales

- Forte proportion d'émail pour une bonne transmission de la lumière
- Texture de surface variée pour une diffusion et une réflexion de la lumière naturelles
- Mamelons/opalescence intégrés pour une diversité de couleurs naturelle
- Stratification de couleur 3D pour un dégradé harmonieux des couleurs

Indications

Meilleure solution de prothèse pour :

- prothèses totales et partielles
- prothèses implanto-portées

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée : p. ex. selon Gysi, le prof. A. Gerber, l'EPF/TIF, l'ABC

Couleurs

- 11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® couleurs : 0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
- 15 x VITA classical A1–D4® couleurs : A1 – D4 (sans B1)

Plaquettes

- 17 x plaquettes de dents antérieures maxillaires (réparties en quatre groupes de formes)
- 5 x plaquettes de dents antérieures mandibulaires

VITAPAN EXCELL® Anterior coffrets

Stock de dents VITAPAN EXCELL

- X-Small* : 67 plaquettes/402 antérieures
- Small* : 134 plaquettes / 804 antérieures
- Medium* : 268 plaquettes / 1 608 antérieures
- Large* : 400 plaquettes / 2 400 antérieures

Disponible en couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles

Carte de formes VITAPAN EXCELL

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITAPAN EXCELL Anterior

VITAPAN PLUS® Anterior

Pour une prothèse vitale et jeune avec un plus de translucidité



Description du produit

Dents antérieures vivantes haut de gamme en composite MRP avec le petit plus en translucidité.

Avantages

- Jeu de lumière naturel via une translucidité exceptionnelle due à un pourcentage d'émail élevé
- Reconstruction simple d'une esthétique jeune via des formes de dents pleines, jeunes et vivantes
- Excellente durabilité grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
- Grande efficacité de polissage et de meulage grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une stabilité optimale des arêtes

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents pleine et vivante pour des « prothèses jeunes »
- Caractéristiques incisives particulièrement jeunes pour une vitalité particulière
- Grandes crêtes palatines pour une structure papillaire/interdentaire idéale

Caractéristiques spéciales

- Proportion d'émail marquée/crêtes translucides pour une transmission idéale de la lumière
- Texture de surface riche en nuances pour un jeu de lumière naturel
- Structure de mamelon intégrée et bord libre blanchâtre pour un rendu chromatique naturel
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses totales et partielles d'une esthétique jeune
- prothèses implanto-portées

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Couleurs

- 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4® A1–D4 (sans B1)

Plaquettes

- 18 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en quatre groupes de formes)
- 6 formes de dents antérieures mandibulaires

VITAPAN PLUS® Anterior coffrets

Stock de dents VITAPAN PLUS

- X-Small* : 67 plaquettes/402 Anterior
- Small* : 134 plaquettes/804 Anterior
- Medium* : 268 plaquettes/1 608 Anterior
- Large* : 400 plaquettes/2 400 Anterior

Disponible en couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.

Carte de formes VITAPAN PLUS

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITAPAN PLUS Anterior
- VITAPAN PLUS Anterior et VITAPAN LINGOFORM Posterior

VITAPAN® LINGOFORM Posterior**Pour tous les concepts de prothèse via une conception de surface de mastication multifonctionnelle****Description du produit**

Dents postérieures multifonctionnelles haut de gamme en composite MRP.

Avantages

- Montage intuitif et simple
via une centrée « automatique » obtenue grâce à un design de surface occlusale selon le principe de roue dentée
- Fiabilité universelle pour tous les concepts de prothèse grâce à la structure multifonctionnelle de la surface de mastication
- Montage rapide
sans meulage important grâce à une centrée définie avec précision
- Excellente durabilité
grâce à une grande solidité, une résistance à l'abrasion et une fonction basée sur la centrée
- Meulage aisé
grâce à une homogénéité des matériaux et une stabilité des arêtes optimaux

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents universelle aux dimensions linguo-vestibulaires naturelles
- Conception multifonctionnelle de la surface de mastication avec des contacts centrés définis

Caractéristiques spéciales

- Texture de surface riche en nuances pour un jeu de lumière naturel
- Angle cuspidien maxillaire : environ de 15° à 20°

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses totales et partielles
- prothèses implanto-portées

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Particulièrement adapté pour concepts d'occlusion lingualés

Couleurs

- 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4® A1–D4 (sans B1)

Plaquettes

- 4 formes de dents postérieures maxillaires
- 4 formes de dents postérieures mandibulaires

VITAPAN® LINGOFORM Posterior coffrets

Stock de dents VITAPAN LINGOFORM

- X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
- Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
- Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
- Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponible en couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.

Carte de formes VITAPAN LINGOFORM

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITAPAN LINGOFORM Posterior

VITA PHYSIODENS® Anterior

Pour des prothèses tout en finesse présentant un jeu de formes stratifiées



Description du produit

Dents antérieures haut de gamme en composite MRP, translucides, pleines et tout en finesse.

Avantages

- La meilleure intégration aux dents résiduelles naturelles grâce à des formes naturelles stratifiées
- Jeu de lumière naturel grâce à une texture de surface aux facettes variées
- Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles résiduelles grâce à une grande fidélité chromatique au teintier et un grand choix de couleurs
- Masquage fiable de structures secondaires ou tertiaires grâce à un volume dentaire (basal) élevé
- Excellente durabilité grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents pleine et naturelle pour une bonne intégration dans l'arcade résiduelle
- Caractéristiques incisives vivantes et courbure labiale naturelle
- Large collet dentaire pour une structure papillaire / interdentaire idéale
- Volume élevé (basal) pour masquage de structures secondaires ou tertiaires

Caractéristiques spéciales

- Saturation exacte pour un bon masquage de structures tertiaires
- Texture de surface riche en facettes pour un jeu de lumière naturel
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses partielles
- constructions de barres, prothèses métalliques, attachements
- travaux télescopiques et coniques

Concept prothétique

Particulièrement adapté pour BLP (prothèse BIO-logique) selon le Dr E. End

Couleurs

- 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4® A1–D4 (sans B1)

Plaquettes

- 21 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en quatre groupes de formes)
- 8 formes de dents antérieures mandibulaires

VITA PHYSIODENS® Anterior coffrets

VITA PHYSIODENS tooth storage

Anterior:

- X-small*: 67 Sets / 402 Anteriors
- Small*: 134 Sets / 804 Anteriors
- Medium*: 268 Sets / 1608 Anteriors
- Large*: 400 Sets / 2400 Anteriors

Available in VITA classical A1–D4® and VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades.**

*) Note: You will receive the most frequently used moulds and shades with the packaged tooth storage. We are also happy to put together storage systems according to your individual specifications.

**) see available shades

Carte de formes VITA PHYSIODENS

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITA PHYSIODENS Anterior et Posterior

VITA PHYSIODENS® Posterior

Pour une reconstruction idéale de la fonction via une morphologie naturelle



Description du produit

Dents postérieures haut de gamme en composite MRP, translucides, pleines et tout en finesse.

Avantages

- Une restauration simple de la fonction masticatoire naturelle grâce aux surfaces de mastication à la morphologie naturelle
- Une centrée intuitive et une bonne intercuspidation grâce au design occlusal axé sur la centrée
- Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles résiduelles grâce à une très bonne fidélité chromatique au teintier et un large choix de couleurs
- Masquage fiable de structures tertiaires grâce à un volume dentaire (basal) élevé
- Excellente durabilité grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie haut de gamme des dents grâce à une dimension dentaire naturelle
- Relief de surfaces occlusales / cuspides à l'image de l'anatomie naturelle

Caractéristiques spéciales

- Volume élevé (basal)
- Angle cuspidien des maxillaires : environ $> 30^\circ$
- Conception de fissures fidèle

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses partielles
- constructions de barres, prothèses métalliques, attachements
- travaux télescopiques et coniques

Concept prothétique

Particulièrement adapté pour BLP (prothèse BIO-logique) selon le Dr E. End

Couleurs

- 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4® A1–D4 (sans B1)

Plaquettes

- 6 formes de dents postérieures maxillaires
- 6 formes de dents postérieures mandibulaires

VITA PHYSIODENS® Posterior coffrets

Stock de dents VITA PHYSIODENS

Posterior

- X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
- Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
- Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
- Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.

Carte de formes VITA PHYSIODENS

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITA PHYSIODENS Anterior et Posterior

VITA LUMIN® VACUUM Anterior**Description du produit**

Les dents en céramique conviennent à toutes les indications de la prothèse amovible de prestige, complète et partielle. Elles sont très brillantes grâce à leur effet Lumin. En termes de conductibilité lumineuse, d'opalescence et de fluorescence, elles n'ont rien à envier à l'exemple vivant. Ces dents uniques fabriquées à la main en Allemagne sont en plus dotées d'éléments d'ancrage mécanique dans la base prothétique afin de garantir la pérennité des prothèses :

- dents antérieures avec tenons plaqués or dans le noyau dur de la céramique

Matériau

Les dents antérieures et postérieures sont conçues dans la fameuse céramique VITA à base de feldspath et de quartz. Grâce à la solidité du matériau et à sa résistance à l'abrasion, la pérennité des prothèses est assurée. La composition du matériau est toute indiquée pour les patients allergiques au MMA.

Triage**Antérieures**

20 plaquettes maxillaires:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 plaquettes mandibulaires:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Postérieures

3 plaquettes maxillaires et mandibulaires SYNOFORM:

10S, 11S, 13S

3 plaquettes maxillaires et mandibulaires CUSPIFORM:

40C, 41C, 44C

Couleurs

10 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Pour toutes les couleurs supplémentaires s'applique un délai de livraison.

Liberté d'association


Les dents antérieures VITA LUMIN VACUUM sont parfaitement adaptées aux deux gammes de dents postérieures VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Anterior coffrets

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Formes	Dents par plaque	Désignation
20	6	Anteriores maxillaire
6	6	Anteriores mandibule

* en couleurs VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

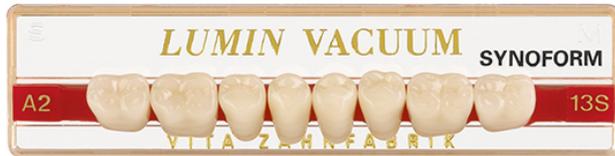VITA LUMIN® VACUUM Posterior**Description du produit**

Les dents en céramique conviennent à toutes les indications de la prothèse amovible de prestige, complète et partielle. Elles sont très brillantes grâce à leur effet Lumin. En termes de conductibilité lumineuse, d'opalescence et de fluorescence, elles n'ont rien à envier à l'exemple vivant. Ces dents uniques fabriquées à la main en Allemagne sont en plus dotées d'éléments d'ancrage mécanique dans la base prothétique afin de garantir la pérennité des prothèses :

- dents postérieures avec contre-dépouilles.

Matériau

Les dents antérieures et postérieures sont conçues dans la fameuse céramique VITA à base de feldspath et de quartz. Grâce à la solidité du matériau et à sa résistance à l'abrasion, la pérennité des prothèses est assurée. La composition du matériau est toute indiquée pour les patients allergiques au MMA.

Triage**Antérieures**

20 plaquettes maxillaires:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 plaquettes mandibulaires:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Postérieures

3 plaquettes maxillaires et mandibulaires SYNOFORM:

10S, 11S, 13S

3 plaquettes maxillaires et mandibulaires CUSPIFORM:

40C, 41C, 44C

Couleurs

10 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Pour toutes les couleurs supplémentaires s'applique un délai de livraison.

Liberté d'association

Les dents antérieures VITA LUMIN VACUUM sont parfaitement adaptées aux deux gammes de dents postérieures VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Posterior coffrets

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Formes	Dents par plaquette	Désignation
3	8	Posteriores Synoform maxillaire
3	8	Posteriores Synoform mandibule
3	8	Posteriores Cuspiform maxillaire
3	8	Posteriores Cuspiform mandibule

VITAPAN® Anterior

Pour tous les cas grâce à une grande diversité de couleurs et de formes



Description du produit

Dents antérieures universelles en composite MRP conformes à l'âge.

Avantages

- Réalisation simple de prothèses totales / partielles selon l'âge
grâce à une grande diversité de formes selon l'âge
- Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles résiduelles
grâce à une très bonne fidélité chromatique au teintier et un large choix de couleurs
- Rendu naturel des couleurs
grâce au dégradé 3D intégré, du collet au bord libre
- Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
- Grande efficacité de polissage et de meulage
grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une stabilité optimale des arêtes

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents conformes à l'âge pour prothèses totales / partielles
- Caractéristiques du bord libre plates et abrasées comme au naturel
- Collet dentaire étroit

Caractéristiques spéciales

- Excellent équilibre entre translucidité et saturation
- Structure régulière de la surface avec caractéristiques de vieillissement
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses totales / partielles
- prothèses gériatologiques
- prothèses en cas d'espace limité

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Couleurs

- 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 15 couleurs VITA classical A1-D4® A1-D4 (sans B1)

Plaquettes

- 31 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en quatre groupes de formes)
- 13 formes de dents antérieures mandibulaires

VITAPAN® Anterior coffrets

Stock de dents VITAPAN

- X-Small* : 67 plaquettes/402 Anterior
- Small* : 134 plaquettes/804 Anterior
- Medium* : 268 plaquettes/1 608 Anterior
- Large* : 400 plaquettes/2 400 Anterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.


Carte de formes VITAPAN

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITAPAN Anterior

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior

Pour une reconstruction simple de la fonction de mastication dans la prothèse totale / partielle

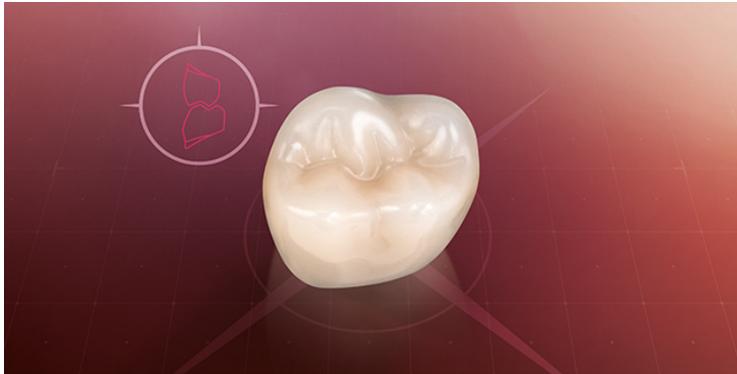**Description du produit**

Dents postérieures élégantes avec relief marqué de la surface de mastication en composite MRP.

Avantages

- Reconstruction simple de la fonction de mastication dans la prothèse totale/partielle grâce au relief marqué de la surface de mastication pour une centrée et intercuspitation confortables
- Excellente durabilité grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
- Grande efficacité de polissage et de meulage grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une stabilité optimale des arêtes

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents mince et gracile pour un large espace lingual et une mastication efficace
- Relief marqué de la surface occlusale / cuspidales pour une centrée et une intercuspitation confortables

Caractéristiques spéciales

- Angle cuspidien maxillaire : environ de 15° à 20°
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleur naturel

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses totales/partielles
- prothèses en cas d'espace limité

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Particulièrement adapté pour concepts d'occlusion buccaux

Couleurs

- 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4® A1–D4 (sans B1)

Plaquettes

- 6 formes de dents postérieures maxillaires
- 6 formes de dents postérieures mandibulaires

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior coffrets

Stock de dents VITAPAN CUSPIFORM

- X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
- Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
- Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
- Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.

Carte de formes VITAPAN CUSPIFORM

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITAPAN CUSPIFORM Posterior

VITAPAN SYNOFORM® Posterior

Pour une grande fiabilité des prothèses gérontologiques grâce au relief de mastication plat



Description du produit

Dents postérieures élégantes avec relief plat de la surface de mastication en composite MRP.

Avantages

- Reconstruction simple de la fonction de mastication en prothèse gérontologique grâce à un relief de mastication plat pour une grande liberté de mouvement
- Excellente durabilité grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
- Grande efficacité de polissage et de meulage grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une stabilité optimale des arêtes

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents mince et gracile pour un large espace lingual
- Relief des surfaces occlusales / cuspides plat et réduit pour une grande liberté de mouvement

Caractéristiques spéciales

- Angle cuspidien des maxillaires : environ 6°
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleur naturel

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses gérontologiques

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Couleurs

- 15 couleurs VITA classical A1–D4® A1–D4 (sans B1)

Plaquettes

- 5 formes de dents postérieures maxillaires
- 5 formes de dents postérieures mandibulaires

VITAPAN SYNOFORM® Posterior coffrets

Stock de dents VITAPAN SYNOFORM

- X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
- Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
- Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
- Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.

Carte de formes VITAPAN SYNOFORM

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITAPAN SYNOFORM Posterior

VITA MFT® Anterior

Pour prothèses standard solides à rentabilité optimale



Description du produit

Dents antérieures basiques en polymère HR pour la prothèse standard solide.

Avantages

- Fabrication fiable de prothèses esthétiques solides grâce à des caractéristiques incisives et angulations naturelles
- Reproduction simple d'un jeu de lumière proche du naturel grâce à un rapport émail-dentine équilibré, des mamelons et une texture intégrés
- Reproduction fiable de la couleur grâce à une bonne fidélité au standard de couleur VITA (VITA classical A1–D4®)

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie dentaire universelle avec une mise en forme naturelle
- Design incisal naturel et élégant

Caractéristiques spéciales

- Rapport émail-dentine équilibré pour un jeu de lumière naturel
- Texture de surface riche en nuances avec mamelons intégrés
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Indications

- Solides solutions standard pour prothèse totale/partielle

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée : par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Couleurs

- 13 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 couleurs VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

Plaquettes

- 12 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en quatre groupes de formes)
- 5 formes de dents antérieures mandibulaires

VITA MFT® Anterior coffrets

Stock de dents VITA MFT

Stock S2 :

- 72 plaquettes/432 Anterior*
- 48 plaquettes/384 Posterior*

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles.

Carte de formes VITA MFT

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITA MFT Anterior

VITA MFT® Posterior

Pour tous les concepts de prothèse via une conception de surface de mastication multifonctionnelle



Description du produit

Dents postérieures basiques en polymère HR avec surfaces de mastication à fonctionnalité optimisée.

Avantages

- Montage de prothèse simplifié
grâce à des points de contact prédéfinis pour une intercuspitation automatique
- Sécurité de montage élevée
grâce à des surfaces occlusales hautement fonctionnelles pour un guidage de centrée articulé
- Travail de meulage réduit
grâce à un design optimisé de la base
- Fiabilité pour tous les concepts de prothèse
grâce à une conception multifonctionnelle de la surface de mastication

Caractéristique

Façonnage

- Géométrie des dents universelle avec un élargissement linguovestibulaire naturel
- Conception multifonctionnelle des surfaces de mastication avec des points de contact prédéfinis

Caractéristiques spéciales

- Angle cuspidien des maxillaires : environ 15° à 20°

Indications

- Solides solutions standard pour prothèse totale/partielle

Concept prothétique

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/TIF, selon ABC

Particulièrement adapté pour : concepts d'occlusion linguale et vestibulaire

Couleurs

- 12 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 couleurs VITA classical A1-D4® A1, A3, C3, D3

Plaquettes

- 3 formes de dents postérieures maxillaires
- 3 formes de dents postérieures mandibulaires

VITA MFT® Posterior coffrets

Stock de dents VITA MFT

Stock S2 :

- 72 plaquettes/432 Anterior*
- 48 plaquettes/384 Posterior*

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **

*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.

**) Cf. couleurs disponibles

Carte de formes VITA MFT

Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents

- VITA MFT Posterio

VITA VIONIC® WAX



Description du produit

Disques de cire pour la fabrication des montages.

Avantages

- Essayage en cire confortable grâce à la fabrication de prothèses CFAO grand format en cire blanche
- Montage précis grâce à des logements minutieusement fraisés à partir de la construction numérique
- Possibilité de correction simple puisque le montage peut être modifié lors de l'essayage

Caractérisations

VITA VIONIC WAX

- Disques en cire synthétique résistants à la température et de forme stable.

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses numériques

Couleurs

- Rose
- Blanc

VITA VIONIC® WAX articles**VITA VIONIC® WAX**

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADP9830
White, Ø 98.4 x h 30 mm	ADW9830

VITA VIONIC® BASE



Description du produit

Disque en PMMA pour la fabrication des bases de prothèse définitives.

Avantages

- Production des bases efficace grâce à la fabrication CFAO sans mise en moufle manuelle ni bourrage
- Reproductibilité simple grâce au système de reproduction de la base d'un simple clic de souris
- Excellente adaptation sur la crête grâce à la fabrication CFAO de la base sans étape de polymérisation

Caractérisations

VITA VIONIC BASE

- disques en PMMA hautement réticulé, polymérisé industriellement
- disques homogènes à l'excellente stabilité en termes de forme et couleur

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- prothèses numériques

Couleurs

- Rose orangé
- Rose profond
- Rose clair

VITA VIONIC® BASE articles**VITA VIONIC® BASE**

VITA VIONIC BASE, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADDP9826
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADDP9830
Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADLP9826
Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADOP9826
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADOP9830

VITA VIONIC® BOND



Description du produit

Solution de scellement pour la fixation des dents prothétiques dans VITA VIONIC Basis.

Avantages

- Fixation adhésive efficace des dents prothétiques sans procédé complexe de polymérisation à froid/chaud
- Fixation précise et sans hiatus des dents dans la cavité grâce à un système de scellement fluide autopolymérisant
- Liaison sûre des dents prothétiques à la base grâce à une solution de scellement adaptée au matériau

Caractérisations

VITA VIONIC BOND

- est un système de scellement à deux composants auto-polymérisables sur base MMA
- a une consistance fluide pour une application précise sur les surfaces de collage
- crée une couche réactive sur les surfaces de collage pour un scellement sûr

Indications

La solution idéale pour

- prothèses numériques VITA VIONIC

Contenu

Contenu kit VITA VIONIC BOND

- VITA VIONIC BOND I, dose de 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, flacon de 1 ml
- Microbrush, 3 unités

VITA VIONIC® BOND coffrets


VITA VIONIC® BOND

**VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK**

Quantité	Contenu	Matériau
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush

VITA VIONIC® FRAME

Pour la réalisation CFAO efficace de prothèses avec Ceramill® Motion 2

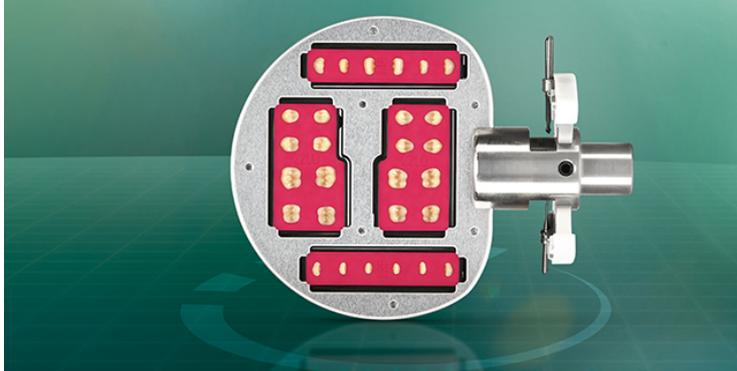

Description du produit

VITAPAN EXCELL DD FRAME

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

Avantages

- Restauration numérique et simple de la fonction adaptée au patient selon différents concepts et intégration des classes d'Angle
- Fabrication efficace de prothèses totales grâce à la modification basale des dents d'un simple clic comme pour la conception de prothèses
- Fabrication CFAO entièrement numérisée pour un process sûr grâce au système de matériaux harmonisés, solution de fixation incluse

Caractéristique

DD FRAME pour le système de fixation Ceramill D-Set

- permet le traitement FAO de dents prothétiques dans un cadre dentaire
- permet le traitement par fraisage des parties dentaires basales et circulaires

Indications

Solution de prothèse idéale pour

- Réalisation de prothèse amovibles partielles et totales

Concept prothétique

Analyse de modèle FAO

- analyse selon TiF avec module de logiciel Ceramill D-flow

Montage de prothèse CAO

Les options de design personnalisées de VITA permettent

- l'application des concepts de mise en place : vestibulaire, lingual, occlusion inversée et selon le Pr Dr A. Gerber
- l'intégration de situations occlusales (occlusion normale/croisée),
- Intégration de toutes les classes squelettiques

Couleurs

- 6 couleurs VITA classical A1–D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Plaquettes

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 formes de dents antérieures maxillaires*
- 4 formes de dents antérieures mandibulaires*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 formes de dents postérieures maxillaires*
- 4 formes de dents postérieures mandibulaires*

*) Un cadre spécial (étrier) intégrant les dents prothétiques pour chaque plaquette de dents maxillaires/mandibulaires.

VITA VIONIC VIGO®

La nouvelle génération de dents pour la réalisation numérique de prothèses par simple clic



Description du produit

VITA VIONIC VIGO est une génération de dents complètement nouvelle en polymère ES, avec une conception de dents optimisée pour le flux de travail numérique.

Avantages

- Augmenter la productivité
Fabrication économique sans rectification manuelle/FAO, grâce à une conception de dent optimisée pour le flux de travail numérique
- Finition rapide
Finalisation rapide de la prothèse, grâce à un scellement adhésif de la dent déjà sablée en zone cervicale dans la base, sans autre étape intermédiaire
- Aspect naturel d'un simple clic
Reproduction efficace des dents naturelles grâce à des dents préfabriquées au jeu de formes/couleurs vivant, de même qu'à une mise en place prothétique numérique consultable directement
- Sécurité du procédé
Fabrication numérique fiable grâce à un système de matériaux harmonisés, y compris une solution de collage unique pour la fixation précise des dents

Caractéristique

Rendu de la forme

- permet une reproduction fidèle des formes de dent et des papilles grâce à un volume vivant avec des crêtes palatines nettes

Caractéristiques spéciales

- offre une bonne dynamique lumineuse avec une translucidité, une opalescence et une fluorescence excellentes, grâce à la structure stratifiée 3D et la pigmentation proches des dents naturelles
- présente un jeu de lumière très naturel, grâce à sa texture de surface diversifiée

Indications

Pour la réalisation numérique hautement efficace de prothèses totales avec tous les systèmes courants de FAO et d'impression 3D

Concept prothétique

- options illimitées de conception adaptées au patient, grâce aux bibliothèques VITA avec une très grande variété de concepts de mise en place tenant compte de la classe/situation d'occlusion (Vestibulaire, Lingualée, Occlusion inversée, Prof. Dr. A. Gerber)

Couleurs

Couleurs VITA classical A1–D4®/Bleach : 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Plaquettes

- 8 formes de dents antérieures maxillaires
- 4 formes de dents antérieures mandibulaires
- 4 formes de dents postérieures maxillaires et mandibulaires

Adhésif VITACOLL®

Adhésif pour dents en résine



Description du produit

VITACOLL colle efficacement les dents en résine à la résine prothétique. L'emploi de différentes résines prothétiques complique la tâche du prothésiste car il est souvent difficile de savoir si les dents en résine utilisées colleront à la résine prothétique. Grâce à VITACOLL, tous les doutes sont dissipés.

Flacon de 100 ml

Avantages

L'adhésif VITACOLL crée une liaison chimique sûre entre les dents en résine et les résines thermo ou autopolymérisables, les résines polyméthacrylate ou injectées. Il prévient tout décollement des dents.

Adhésif VITACOLL® articles

Adhésif VITACOLL®

Désignation	N° art.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

Film isolant silicone VITAFOL[®] H

Vernis isolant pour les dents artificielles lors de la fabrication de la prothèse



Description du produit

VITAFOL H est un vernis silicone isolant pour la protection des dents en résine et en céramique lors de la fabrication de la prothèse.

Avantages

- VITAFOL H protège les dents en résine et en céramique. Les plus infimes détails du liseré gingival sont préservés. Avec VITAFOL H, les zones vernies demeurent propres et ne nécessitent plus de dégrossissage.
- Plus besoin d'isoler du plâtre les zones vernies avec VITAFOL H. Aucun isolant ne peut donc plus infiltrer la base des dents. Avec des dents en résine, on évite ainsi la formation d'une couche barrière entre les dents et la résine de base.
- VITAFOL H grâce à son effet tampon évite la détérioration des dents lors de la pressée et du démoulage.

Film isolant silicone VITAFOL® H coffrets

Film isolant silicone VITAFOL® H



**Coffret Eco VITAFOL H
A9FG***

Quantité	Contenu	Matériau
3	70 ml	Pâte VITAFOL H
3	15 ml	Liquide de mélange VITAFOL H
3	80 g	Cristaux VITAFOL H
1	pièce	Bloc de mélange
1	pièce	Pinceau
		Mode d'emploi

* Quantité suffisante pour env. 300 prothèses de 14 dents



**Coffret labo VITAFOL H
A9FL***

Quantité	Contenu	Matériau
1	70 ml	Pâte VITAFOL H
1	15 ml	Liquide durcisseur VITAFOL H
1	80 g	Cristaux VITAFOL H
1	pièce	Bloc de mélange
1	pièce	Pinceau
		Mode d'emploi

* Quantité suffisante pour env. 100 prothèses de 14 dents

Film isolant silicone VITAFOL® H articles**Film isolant silicone VITAFOL® H**

Désignation	N° art.
VITAFOL H Liquide durcisseur, 15 ml	A9F15
VITAFOL H Cristaux, 80 g	A9F50
VITAFOL H PASTE, 70 ml	A9F90
VITAFOL H Bloc de mélange imprimé, 50 feuilles	A9FA
VITAFOL H Pinceau n° 11	A9FP

Meuble à dents vario

Meubles en plastique



Description du produit

Le meuble à dents VITA vario avec ses vastes possibilités de stockage et son faible encombrement est parfait pour le rangement de tous les stocks de dents VITA.

Ce mobilier inédit est modulable grâce au rajout possible de tiroirs supplémentaires. Il est conçu dans un plastique de haute qualité, résistant et d'une couleur gris clair neutre.

Les tiroirs sont très maniables et entièrement extractibles grâce à une glissière télescopique des deux côtés.

Le meuble à dents VITA vario fait partie du système VITA Modulbox et donc compatible avec tous les modules de ce système.

Triage


Contenance par tiroir:

72 x 6 = 432 antérieures en plaquettes de 6 dents

48 x 8 = 384 postérieures en plaquettes de 8 dents

Meuble à dents vario articles**Meuble à dents vario**

Désignation	N° art.
Meuble S10 avec 10 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Meuble S12 avec 12 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Meuble S2 avec 2 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Meuble S4 avec 4 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Meuble S6 avec 6 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Meuble S8 avec 8 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8

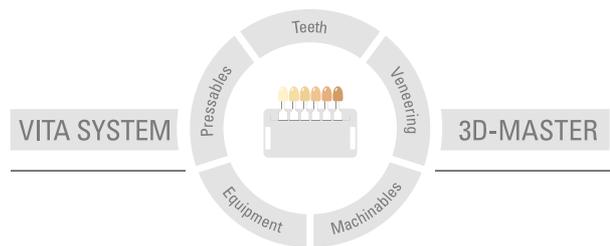

Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 02/2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik