
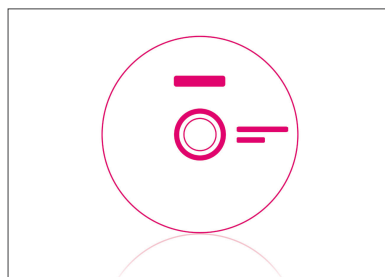
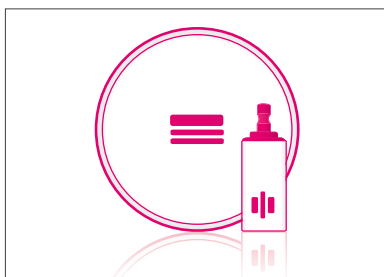
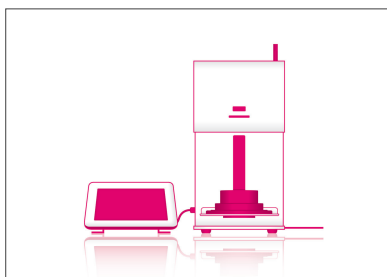
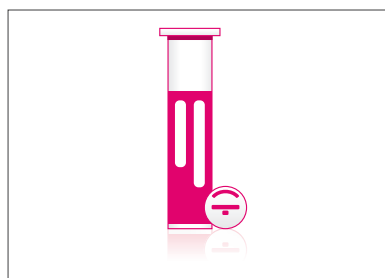
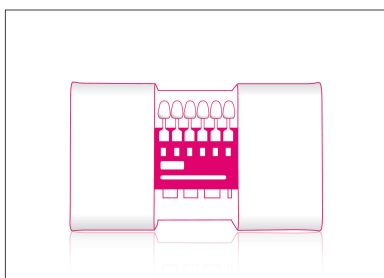


Compendium VITA

Février 2021

Détermination de la couleur

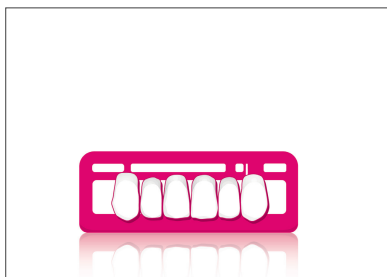

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA Easyshade® V

Détermination optimale des couleurs, sécurité maximale



Description du produit

Le spectrophotomètre VITA Easyshade V a été conçu pour la détermination précise, rapide et fiable de la couleur des dents naturelles de même que des restaurations en céramique.

- **Détermination précise et reproductible de la couleur de dent en quelques secondes** grâce à une technique de mesure de pointe
- **Résultats de mesure objectifs et fiables** du fait de la technologie LED indépendante de l'environnement
- **Sûr et scientifique** grâce aux informations de couleur de dent exactes dans les standards de couleur VITA pour une reproduction sûre de la couleur et, ainsi, une réduction des corrections de couleur
- **Utilisation simple et intuitive** grâce à l'écran tactile avec logiciel d'utilisation simple
- **Communication numérique efficace** pour l'échange de données sur la couleur de dent et les photos de patient entre le cabinet dentaire et le laboratoire

Compatibilité du système

VITA Assist

VITA Assist. Communication et documentation professionnelles des couleurs de dents pour le cabinet dentaire et le laboratoire

VITA Assist permet de documenter et de communiquer de façon professionnelle les couleurs de dents déterminées avec VITA Easyshade V. Le logiciel sous Windows combine les photos numériques du patient avec toutes les informations sur la couleur de dent du patient. Cela vous permet en même temps de disposer d'une documentation clinique et d'échanger efficacement entre le cabinet dentaire et le laboratoire afin de réaliser les meilleures restaurations possibles.

Combinaison conseillée VITA mobileAssist

L'application VITA mobileAssist permet la transmission simple et efficace de la couleur de la dent entre le cabinet dentaire et le laboratoire. Via une interface Bluetooth interne, les données sont transférées du VITA Easyshade V à l'application, où elles sont associées à une photo du patient avant d'être transmises par courriel. Toutes les informations pertinentes sur la couleur de dent de même que les photos de patients peuvent être ainsi envoyées de façon mobile et pratique au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

VITA Easyshade® V

Données techniques

- Spectrophotomètre, plage de mesure 400 – 700 nm
- Concept de charge par induction avec accumulateurs durables AA
- Indication de toutes les couleurs de dent dans les systèmes de couleurs reconnus VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER, de même qu'indication des couleurs VITABLOCS et des couleurs Bleached-Index selon le standard de l'American Dental Association
- Affichage des valeurs de laboratoire et LCH
- Interface Bluetooth pour une communication sans fil avec le logiciel PC VITA Assist et l'application VITA mobileAssist

VITA Easyshade® V articles**VITA Easyshade®**

Désignation		N° art.
VITA Easyshade V, 100-230V * Contenu: 1 Chargeur VITA Easyshade V 1 Pièce à main Easyshade V (incl. 2x Accu NIMH, rechargeable) 1 Cable de branchement 1 Capot de protection (2 x 18 pièces) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1 module Bluetooth USB 1 Manuel utilisateur et un mode d'emploi abrégé		DEASY5

VITA Assist



Description du produit

Le logiciel VITA Assist regroupe actuellement les modules **VITA ShadeAssist** et **VITA ToothConfigurator**.

VITA Assist permet de documenter et de communiquer de façon professionnelle les couleurs de dents déterminées avec VITA Easyshade. Le logiciel sous Windows combine les photos numériques du patient avec toutes les informations sur la couleur de dent du patient. Cela vous permet en même temps de disposer d'une documentation clinique et d'échanger efficacement entre le cabinet dentaire et le laboratoire afin de réaliser les meilleures restaurations possibles.

VITA Assist. Communication et documentation professionnelles des couleurs de dents pour le cabinet dentaire et le laboratoire

VITA Assist aide activement à bien choisir les matériaux CFAO nécessaires, à réaliser le montage cosmétique des restaurations en céramique et à résoudre des cas complexes. Vous profitez des fonctions suivantes.

- Transmission sans fil des données du VITA Easyshade
- Travail professionnel sur les photos cliniques pour une documentation aussi complète que possible
- Intégration possible de clichés radiographiques numériques, de photos rapprochées et de photos détournées
- Multiples fonctions de commentaires
- Fonctions d'aide pour choisir les matériaux les mieux adaptés pour des cas cliniques spécifiques

VITA ShadeAssist

- **Interface idéale** entre le cabinet dentaire et le laboratoire
- **Permet une communication de la couleur sans erreur**
- **Réduit ainsi au minimum les coûts** des déterminations de couleur et des corrections subséquentes

VITA ToothConfigurator

- **Module de conseil interactif**
- **Intégration du patient** à la planification de la prothèse

Portée de la version limitée et de la version complète

- Version limitée (Comprend l'application VITA ShadeAssist et une version de démonstration de VITA ToothConfigurator)
- Version complète (Comprend l'application VITA ShadeAssist et le VITA ToothConfigurator)

VITA Assist articles**VITA Assist**

Désignation	N° art.
VITA Assist (Full version, english)	DASSISTSET06
VITA Assist (version complète, français)	DASSISTSETF06
VITA Assist (Full Version, italian)	DASSISTSETI06
VITA Assist (Full Version, spanish)	DASSISTSETSP06

Accessoires



Description du produit

Capot de protection

- **Capot de protection hygiéniques** à usage unique

Malette de transport

- **Transport sûr** du VITA Easyshade® V grâce à la malette pratique

Accessoires articles**Accessoires VITA Easyshade®**

Désignation	N° art.
VITA Easyshade V Capuchon de protection, 9 x 18 pièces	D58000S
Valise de transport pour VITA Easyshade V	DEASY5K

Teintier VITA classical A1-D4®



Description du produit

Le teintier VITA classical A1 – D4 est destiné à la définition sûre des teintes dentaires.

Les teintes de la gamme VITA classical sont classées comme suit:

- A1 - A4 (rougeâtre-brunâtre)
- B1 - B4 (rougeâtre-jaunâtre)
- C1 - C4 (grisâtre)
- D2 - D4 (gris-rougeâtre)

Contenu

Teintier VITA classical A1-D4®

N° art. B027C

Conseils pour la prise de teinte

- Définir les teintes autant que possible sous une lumière du jour diffuse ou sous une lampe lumière du jour normalisée mais pas sous un éclairage ambiant classique.
- Tout l'environnement doit être aussi neutre que possible. Demander aux patientes de retirer leur rouge à lèvres et masquer les vêtements de couleur vive avec un tissu de couleur grise.
- Choisir rapidement la teinte et toujours se fier à la première décision car les yeux fatiguent au bout de 5 à 7 sec.

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades



Description du produit

Les Bleached Shades de VITA sont bien pratiques pour le dentiste lorsqu'il doit définir les teintes blanchies, en partant du teintier VITA classical. Avec ces VITA Bleached Shades, les teintes des dents blanchies existent désormais dans le teintier original.

Les VITA Bleached Shades sont les teintes blanchies 0M1, 0M2 et 0M3, extraites du VITA SYSTEM 3D-MASTER. Elles sont également disponibles en complément du VITA classical A1 - D4 et du VITAPAN classical.

Les teintes VITA Bleached Shades sont également disponibles comme complément pour le teintier VITA classical A1-D4 ainsi que pour le teintier VITAPAN classical.

La planification et le contrôle des procédures de blanchiment dentaire seront effectués avec une grande précision grâce au VITA Bleachedguide 3D-MASTER conçu à cet effet.

Conseils pour la prise de teinte


- Définir les teintes autant que possible sous une lumière du jour diffuse ou sous une lampe lumière du jour normalisée mais pas sous un éclairage ambiant classique.
- Tout l'environnement doit être aussi neutre que possible. Demander aux patientes de retirer leur rouge à lèvres et masquer les vêtements de couleur vive avec un tissu de couleur grise.
- Choisir rapidement la teinte et toujours se fier à la première décision car les yeux fatiguent au bout de 5 à 7 sec.

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades articles

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades

Désignation		N° art.
Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades		B027IV1

VITA Linearguide 3D-MASTER®

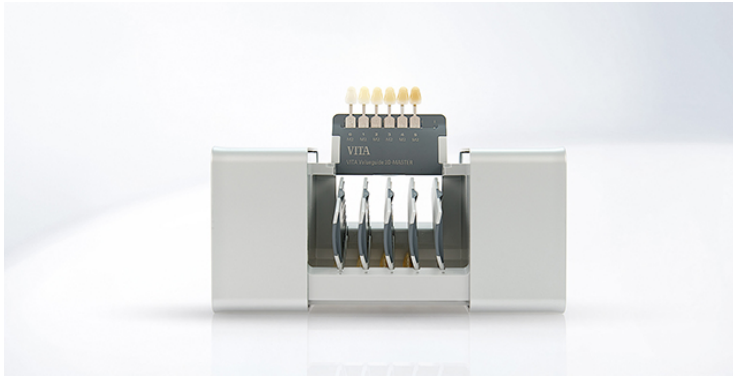

Description du produit

Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER, vous définissez rapidement et précisément la teinte de dent correcte. Grâce au design moderne et à la conception systématisée du VITA Linearguide, vous pouvez rapidement identifier la bonne teinte 3D-MASTER.

Le VITA Linearguide 3D-MASTER facilite le passage d'un système de prise de teinte classique au VITA SYSTEM 3D-MASTER, un système précis pour la définition et la communication de la teinte.

Le VITA Linearguide 3D-MASTER contient les 29 teintes échantillons identiques à celles du VITA Toothguide 3D-MASTER.


Avantages

- Manipulation classique
- Utilisation facile
- Définition de la teinte sûre, rapide et précise pour satisfaire vos clients
- Design moderne reflétant l'esthétique et la clarté

VITA Linearguide 3D-MASTER® articles**VITA Linearguide 3D-MASTER®**

Désignation		N° art.
VITA Linearguide 3D-MASTER		B363

VITA Toothguide 3D-MASTER®

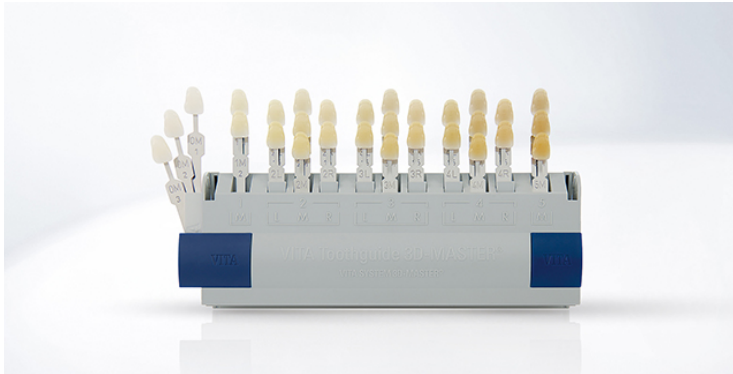

Description du produit

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Avec le VITA Toothguide 3D-MASTER, il est possible de définir toutes les teintes de dent naturelles d'une manière sûre et systématique.

BLEACHED SHADE GUIDE

Avec le VITA BLEACHED SHADE GUIDE, il est possible de définir les teintes des dents blanchies d'une manière sûre et systématique, selon le principe du VITA Toothguide.

Avantages


- Relevé de la teinte de dent en 3 étapes
- Définition précise de la teinte de dent
- Comparaison possible: oui/non, mieux/moins bien – décision
- Définition mathématique précise des teintes de dents (possibilité de les mélanger)
- Méthode facilement assimilable

VITA Toothguide 3D-MASTER® articles

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Désignation		N° art.
VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0		B2600MS
VITA Toothguide 3D-MASTER avec BLEACHED SHADE GUIDE		B360

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

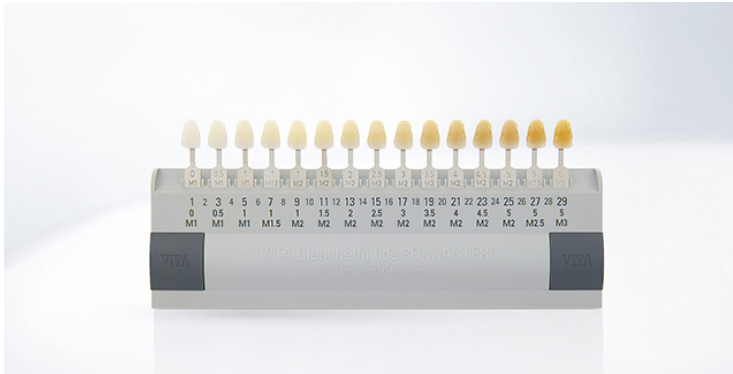

Description du produit

Le VITA Bleachedguide 3D-MASTER sert à planifier et contrôler les procédures d'éclaircissement des dents. La structure suit d'une part la structure logique du VITA SYSTEM 3D-MASTER en reposant sur les 3 paramètres luminosité, saturation et teinte.

De plus en rapport avec l'American Dental Association (ADA) les 29 degrés de luminosité chromatique définis figurent dans le VITA Bleachedguide 3D-MASTER. Avec cette nouvelle classification le VITA Bleachedguide 3D-MASTER s'inscrit dans cette norme mondialement reconnue. C'est donc le produit conseillé à tous les praticiens.


Avantages

- La conception claire et compréhensible - maintenant avec en plus une désignation numérique - favorise une bonne communication entre le dentiste et le patient. La classification par numéros du VITA Bleachedguide 3D-MASTER est basée sur la définition des degrés de luminosité de l'American Dental Association et apporte une précision supplémentaire quant au changement apporté par le processus de blanchiment.
- Le degré d'éclaircissement souhaité se définit précisément avec le patient avant le traitement à l'aide des barrettes de teinte puis contrôlé à la fin.
- La couleur appropriée pour une restauration sera sélectionnée avec le VITA Toothguide 3D-MASTER puis reproduite avec les matériaux correspondants.

VITA Bleachedguide 3D-MASTER® articles

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

Désignation		N° art.
VITA Bleached Shades (complément) avec 2 Adapter et 3 échantillons de teinte		B027BS
VITA Bleachedguide 3D-MASTER		B361

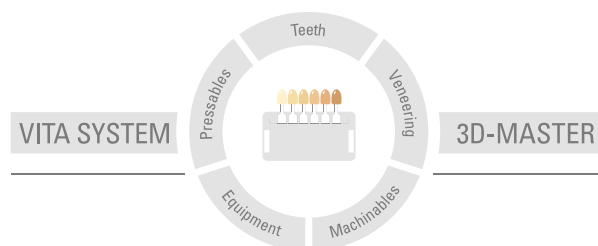

Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 02/2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik