
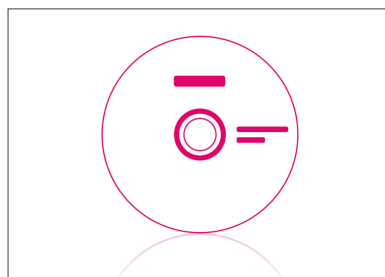
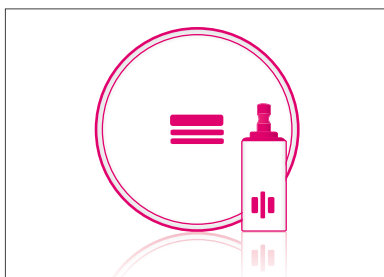
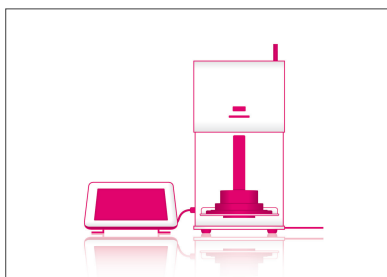
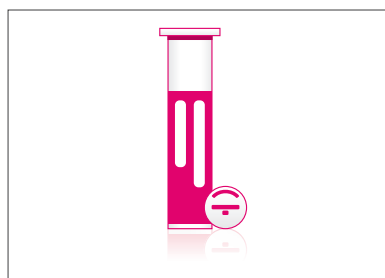
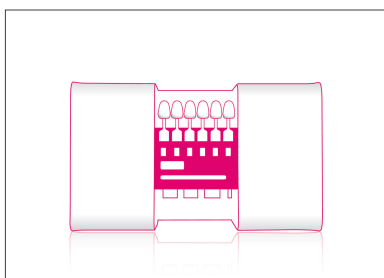


Compendium **VITA** Novembre 2022

Fixation

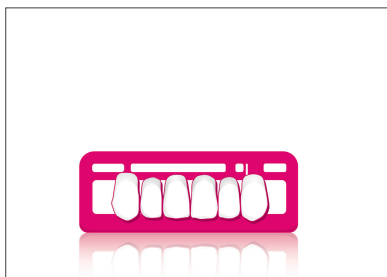

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

Un système de scellement adhésif avec des composants parfaitement adaptés destiné au conditionnement de la substance dentaire et du matériau de restauration



Description du produit

Un système de scellement adhésif avec des composants parfaitement adaptés destiné au conditionnement de la substance dentaire et du matériau de restauration.

Pour le scellement de toutes les restaurations indirectes en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, en dioxyde de zirconium, en composite et en métal.

Avantages

- Sceller fiablement des matériaux de restauration multiples avec des adhésifs spécifiquement adaptés aux matériaux.
- Un procédé de scellement sûr grâce à des coffrets de scellement clairs, avec des composants organisés de façon systématique et codés par couleur.
- Ce coffret pratique en deux parties et sous forme de plateau normalisé permet d'avoir toujours tous les composants à portée de main.

Contenu

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH

Est un gel d'acide phosphorique à 37% pour le mordantage de la substance dentaire dans le cadre d'un scellement par collage des restaurations sur la substance dentaire naturelle. Il est également utilisable avec la technique du mordantage total et sélectif.

VITA ADIVA® T-BOND I+II

Est un système de collage à double mode de polymérisation. VITA ADIVA T-BOND permet une bonne liaison entre le composite de scellement et l'émail mordancé ou la dentine.

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Est un gel d'acide fluorhydrique à 5% servant au mordantage des restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, afin de créer un ancrage micromécanique entre la restauration et le composite de scellement. Uniquement destiné à une utilisation extra-orale !

VITA ADIVA® C-PRIME

Est un adhésif qui crée une liaison chimique entre les restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride et le composite de scellement.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Est un adhésif qui crée une liaison chimique entre les restaurations frittées en dioxyde de zirconium et le composite de scellement.

VITA ADIVA® M-PRIME

Est un adhésif qui crée une liaison chimique entre les restaurations sablées en titane et en alliage précieux et non-précieux et le composite de scellement.

VITA ADIVA® F-CEM

Est un composite de scellement bipolymérisant adhésif servant au scellement définitif des restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, en dioxyde de zirconium, en composite et en métal.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Est un gel de glycérine incolore pour prévenir la couche d'inhibition de l'oxygène dans le scellement adhésif. Peut aussi s'utiliser comme pâte d'essai.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE coffrets

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET

**VITA ADIVA FULL-ADHESIVE SET
FAFASV1**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 ml	VITA ADIVA F-CEM A2 Universal
1	10 pi	usage unique transparents
1	3 ml	VITA ADIVA TOOTH-ETCH
1		Canules d application à usage unique, bleu pour TOOTH-ETCH, 15 pièces
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1		Canules rouges à usage unique CERA ETCH, 20 pièces
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND I
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND II
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA F-CEM, 5 ml

Désignation	N° art. 5 ml
A2 Universal	FAFCEMA25
A3	FAFCEMA35
Translucent	FAFCEMT5
White opaque	FAFCEMW05

VITA ADIVA® COMPONENTS

Désignation	N° art.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml gel d'acide fluorhydrique à 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml gel d'acide fluorhydrique à 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Apprêt céramique	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Apprêt métal	FAMP5

usage unique, 10 pièces

Désignation	N° art. 10 pièces
transparents	FAOP3V1

Désignation	N° art.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Système Adhésif à prise duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) gel d'acide phosphorique à 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Apprêt zircone	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Désignation	N° art.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

Un système de scellement autoadhésif avec des composants parfaitement adaptés destiné au conditionnement du matériau de restauration



Description du produit

Un système de scellement autoadhésif avec des composants parfaitement adaptés destiné au conditionnement du matériau de restauration.

Pour le scellement de toutes les restaurations indirectes en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, en dioxyde de zirconium, en composite et en métal.

Avantages

- Sceller fiablement des matériaux de restauration multiples avec des adhésifs spécifiquement adaptés aux matériaux.
- Un procédé de scellement sûr grâce à des coffrets de scellement clairs, avec des composants organisés de façon systématique et codés par couleur.
- Ce coffret pratique en deux parties et sous forme de plateau normalisé permet d'avoir toujours tous les composants à portée de main.

Contenu

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Est un gel d'acide fluorhydrique à 5 % servant au mordantage des restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, afin de créer un ancrage micromécanique entre la restauration et le composite de scellement. Uniquement destiné à une utilisation extra-orale !

VITA ADIVA® C-PRIME

Est un adhésif qui crée une liaison chimique entre les restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride et le composite de scellement.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Est un adhésif qui crée une liaison chimique entre les restaurations frittées en dioxyde de zirconium et le composite de scellement.

VITA ADIVA® M-PRIME

Est un adhésif qui crée une liaison chimique entre les restaurations sablées en titane et en alliage précieux et non-précieux et le composite de scellement.

VITA ADIVA® S-CEM

Est un composite de scellement bipolymérisant autoadhésif servant au scellement définitif des restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et hybride, en dioxyde de zirconium, en composite et en métal.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Est un gel de glycérine incolore pour prévenir la couche d'inhibition de l'oxygène dans le scellement adhésif. Peut aussi s'utiliser comme pâte d'essai.

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE coffrets

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET

**VITA ADIVA SELF-ADHESIVE SET
FASASV1**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 ml	VITA ADIVA S-CEM A2 Universal
1	10 pi	usage unique transparents
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1		Canules rouges à usage unique CERA ETCH, 20 pièces
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 4:1

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA S-CEM, 5 ml

Désignation	N° art. 5 ml
A2 Universal	FASCEMA25
Translucent	FASCENT5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Désignation	N° art.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml gel d'acide fluorhydrique à 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml gel d'acide fluorhydrique à 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Apprêt céramique	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Apprêt métal	FAMP5

usage unique, 10 pièces

Désignation	N° art. 10 pièces
transparents	FAOP3V1

Désignation	N° art.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Système Adhésif à prise duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) gel d'acide phosphorique à 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Apprêt zircone	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Désignation	N° art.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® TE-CEM



Description du produit

VITA ADIVA TE-CEM est une résine de scellement à double mode de polymérisation destinée au scellement temporaire.

Elle est proposée dans la couleur Translucent.

VITA ADIVA® TE-CEM articles

VITA ADIVA® TE-CEM

VITA ADIVA TE-CEM, 5 ml

Désignation	N° art. 5 ml
Translucent	FATECEM5

VITA ADIVA® IA-CEM

Solution de collage ultra-opaque pour les restaurations implanto-portées



Description du produit

VITA ADIVA IA-CEM est un composite de collage ultra-opaque à double mode de polymérisation très masquant pour les prothèses implanto-portées.

Il sert au collage adhésif définitif des couronnes (sur pilier) et des mésostructures sur base de collage en titane et des piliers individuels en titane ou en dioxyde de zirconium.

Chaque composite de collage est associé à un adhésif spécifique au matériau pour une cohésion résistante entre la restauration et le pilier.

VITA ADIVA® IA-CEM coffrets

VITA ADIVA® IA-CEM

VITA ADIVA® IA-CEM SET

VITA ADIVA® IA-CEM SET

FAIACEMSET


Quantité	Contenu	Matériau
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM articles

VITA ADIVA® IA-CEM

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Désignation	N° art. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

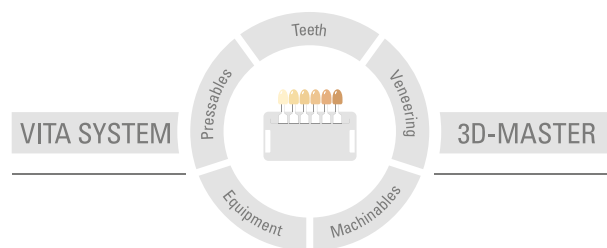

Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 11/2022

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik