
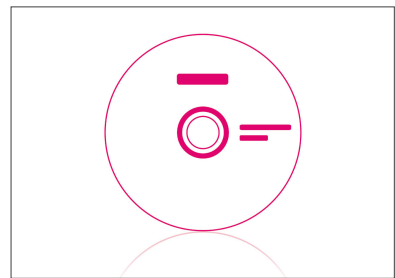
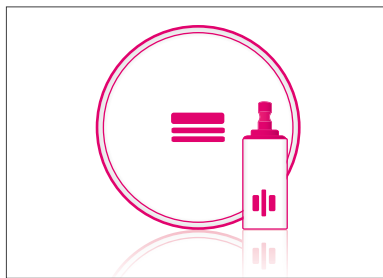
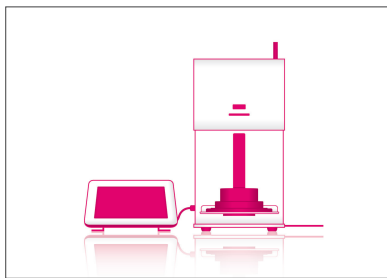


Compendio VITA Abril 2024

Recubrimiento

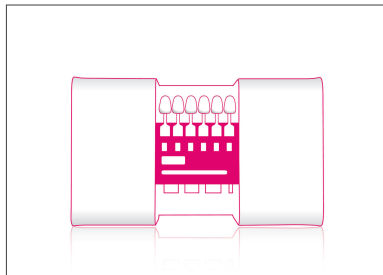

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITAVM®13

Para el recubrimiento total de estructuras metálicas con un CET convencional



Descripción del producto

VITA VM 13 es una cerámica de feldespato de estructura fina altamente estética perfectamente adaptada al CET de las aleaciones de cocción clásicas (aprox. 13,8 – 15,2 µm/mK). Con total independencia de si las aleaciones clásicas se cueban, se fresan o se sinterizan.

VITA VM 13 constituye una alternativa real a la cerámica sin metal, y demuestra sus virtudes en todos los casos en los que es necesario enmascarar una estructura metálica.

La temperatura de cocción (cocción de la dentina a 880 °C) le proporciona una gran seguridad de procesamiento, en especial para aleaciones con un punto de solidificación bajo (<1100 °C).

Sus componentes principales son feldespatos potásicos y sódicos puros, que aportan un efecto cromático brillante y unos valores máximos de resistencia a la flexión.

La superficie homogénea y lisa de VITA VM 13 facilita extraordinariamente las tareas de desbastado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada in situ. De este modo se consiguen superficies lisas y bien selladas.

Se reduce sensiblemente la adhesión de placa a la superficie de la cerámica, lo cual facilita al paciente el cuidado de la restauración de alta calidad.

VITA VM 13 es un componente de gran calidad del innovador sistema VITA VM: la solución universal para todas las indicaciones habituales. Ya se trate de metalocerámica, cerámica sin metal o composite: las posibilidades son ilimitadas.

Ventajas

- Efecto cromático natural y dinámica lumínica gracias a la estructura fina.
- La mínima tendencia a la contracción reduce la necesidad de repetir cocciones.
- Extraordinaria facilidad de modelado que permite la aplicación rápida y precisa de la cerámica.
- Amplia oferta de materiales complementarios para lograr unos efectos excelentes.
- Proceso de trabajo eficiente y económico.
- Personalizable mediante VITA AKZENT Plus y VITA INTERNO.
- Seguridad de proceso basada en muchos años de experiencia.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-Master y VITA classical A1 – D4.

VITAVM®13 Surtidos

VITAVM®13 VITA classical A1-D4®



VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®
Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
BV13BUK12CV1

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®13 ONE COLOR KIT A2 POWDER
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV13OCCA2V3

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A2
1	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA varilla de colores A2

VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
BV13BUK12V1

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®13 ONE COLOR KIT 2M2 POWDER
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV130CK2M2V3

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA varilla de colores 2M2

VITAVM®13 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV130CK3M2V3

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA varilla de colores 3M2

VITAVM®13 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITAVM®13 GINGIVA KIT
Materiales gingivales de aspecto natural
BV13GKV1

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 MARGIN KIT

**Para la configuración de hombros cerámicos
BV13MKV1**

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	VITA VM 13 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 PROFESSIONAL KIT

**Para añadir efectos y características naturales
BV13PKV2**

Cantidad	Contenido	Material
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 13 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 13 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 13 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Guía de colores VITA VM EFFECT CHROMA
1		Guía de colores VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Guía de colores VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®13 Productos**VITAVM®13 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
A1	B453015
A2	B453025
A3	B453035
A3.5	B453045
A4	B453055
B1	B453065
B2	B453075
B3	B453085
B4	B453095
C1	B453105
C2	B453115
C3	B453125
C4	B453135
D2	B453145
D3	B453155
D4	B453165

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B4540112	B4540150
A2	B4540212	B4540250
A3	B4540312	B4540350
A3.5	B4540412	B4540450
A4	B4540512	B4540550
B1	B4540612	B4540650
B2	B4540712	B4540750
B3	B4540812	B4540850
B4	B4540912	B4540950
C1	B4541012	B4541050
C2	B4541112	B4541150
C3	B4541212	B4541250
C4	B4541312	B4541350
D2	B4541412	B4541450
D3	B4541512	B4541550
D4	B4541612	B4541650

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	ENL	B4543112	B4543150
A2	ENL	B4543212	B4543250
A3	ENL	B4543312	B4543350
A3.5	END	B4543412	B4543450
A4	END	B4543512	B4543550
B1	END	B4543612	B4543650
B2	END	B4543712	B4543750
B3	END	B4543812	B4543850
B4	END	B4543912	B4543950
C1	END	B4544012	B4544050
C2	END	B4544112	B4544150
C3	ENL	B4544212	B4544250
C4	ENL	B4544312	B4544350
D2	END	B4544412	B4544450
D3	END	B4544512	B4544550
D4	END	B4544612	B4544650

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	ENL	B4545112	B4545150
A2	ENL	B4545212	B4545250
A3	ENL	B4545312	B4545350
A3.5	END	B4545412	B4545450
A4	END	B4545512	B4545550
B1	END	B4545612	B4545650
B2	END	B4545712	B4545750
B3	END	B4545812	B4545850
B4	END	B4545912	B4545950
C1	END	B4546012	B4546050
C2	END	B4546112	B4546150
C3	ENL	B4546212	B4546250
C4	ENL	B4546312	B4546350
D2	END	B4546412	B4546450
D3	END	B4546512	B4546550
D4	END	B4546612	B4546650

VITAVM® 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
0M1	ENL	B4503112	B4503150	-
0M2	ENL	B4503212	B4503250	-
0M3	ENL	B4503312	B4503350	-
1M1	ENL	B4503412	B4503450	-
1M2	ENL	B4503512	B4503550	-
2L1.5	ENL	B4503612	B4503650	-
2L2.5	ENL	B4503712	B4503750	-
2M1	ENL	B4503812	B4503850	-
2M2	ENL	B4503912	B4503950	B45039250
2M3	ENL	B4504012	B4504050	B45040250
2R1.5	ENL	B4504112	B4504150	-
2R2.5	ENL	B4504212	B4504250	-
3L1.5	ENL	B4504312	B4504350	-
3L2.5	ENL	B4504412	B4504450	-
3M1	ENL	B4504512	B4504550	-
3M2	ENL	B4504612	B4504650	B45046250
3M3	ENL	B4504712	B4504750	B45047250

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
3R1.5	ENL	B4504812	B4504850	-
3R2.5	ENL	B4504912	B4504950	-
4L1.5	END	B4505012	B4505050	-
4L2.5	END	B4505112	B4505150	-
4M1	END	B4505212	B4505250	-
4M2	END	B4505312	B4505350	-
4M3	END	B4505412	B4505450	-
4R1.5	END	B4505512	B4505550	-
4R2.5	END	B4505612	B4505650	-
5M1	END	B4505712	B4505750	-
5M2	END	B4505812	B4505850	-
5M3	END	B4505912	B4505950	-

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
0M1	ENL	B4506112	B4506150	-
0M2	ENL	B4506212	B4506250	-
0M3	ENL	B4506312	B4506350	-
1M1	ENL	B4506412	B4506450	-
1M2	ENL	B4506512	B4506550	-
2L1.5	ENL	B4506612	B4506650	-
2L2.5	ENL	B4506712	B4506750	-
2M1	ENL	B4506812	B4506850	-
2M2	ENL	B4506912	B4506950	B45069250
2M3	ENL	B4507012	B4507050	B45070250
2R1.5	ENL	B4507112	B4507150	-
2R2.5	ENL	B4507212	B4507250	-
3L1.5	ENL	B4507312	B4507350	-
3L2.5	ENL	B4507412	B4507450	-
3M1	ENL	B4507512	B4507550	-
3M2	ENL	B4507612	B4507650	B45076250
3M3	ENL	B4507712	B4507750	B45077250
3R1.5	ENL	B4507812	B4507850	-
3R2.5	ENL	B4507912	B4507950	-
4L1.5	END	B4508012	B4508050	-
4L2.5	END	B4508112	B4508150	-
4M1	END	B4508212	B4508250	-
4M2	END	B4508312	B4508350	-
4M3	END	B4508412	B4508450	-

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
4R1.5	END	B4508512	B4508550	-
4R2.5	END	B4508612	B4508650	-
5M1	END	B4508712	B4508750	-
5M2	END	B4508812	B4508850	-
5M3	END	B4508912	B4508950	-

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
OP0	B4525012	-
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	-

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

**VITAVM®13 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4**

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EE1	B4509112
EE2	B4509212
EE3	B4509312
EE4	B4509412
EE5	B4509512
EE6	B4509612
EE7	B4509712
EE8	B4509812
EE9	B4509912
EE10	B4510012
EE11	B4510112

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EC1	B4512112
EC2	B4512212
EC3	B4512312
EC4	B4512412
EC5	B4512512
EC6	B4512612
EC7	B4512712
EC8	B4512812
EC9	B4512912
EC10	B4513012
EC11	B4513112

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EL1	B4514112
EL2	B4514212
EL3	B4514312
EL4	B4514412
EL5	B4514512
EL6	B4514612

VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EP1	B4515112
EP2	B4515212
EP3	B4515312

VITA VM 13 MAMELON, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
MM1	B4516112
MM2	B4516212
MM3	B4516312

VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
E01	B4517112
E02	B4517212
E03	B4517312
E04	B4517412
E05	B4517512

VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
COR1	B4522112
COR2	B4522212
COR3	B4522312

VITA VM 13 GINGIVA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
G1	B4523112
G2	B4523212
G3	B4523312
G4	B4523412
G5	B4523512

VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
CP1	B4524112
CP2	B4524212
CP3	B4524312
CP4	B4524412
CP5	B4524512

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
W0	B4525912	B4525950

VITA VM 13 MARGIN, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
M1	B4526112
M4	B4526412
M5	B4526512
M7	B4526712
M8	B4526812
M9	B4526912

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
GOL	B4527112
GOD	B4527312

VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
C01	B4528112
C02	B4528212
C03	B4528312

VITA VM 13 SUN OPAQUE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
S01	B4529112
S02	B4529212
S03	B4529312

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
W0	B453597

VITA VM 13 SUN DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
SD1	B4536112
SD2	B4536212
SD3	B4536312

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
G0L	B453715
G0D	B453735

VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
C01	B453815
C02	B453825
C03	B453835

VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
S01	B453915
S02	B453925
S03	B453935

VITA VMK Master®

Para el recubrimiento total de estructuras metálicas con un CET convencional



Descripción del producto

VITA VMK Master es una cerámica de recubrimiento de feldespato natural para aleaciones de cocción clásicas (aprox. 13,8 – 15,2 µm/mK).

Con total independencia de si las aleaciones clásicas se cueban, se fresan o se sinterizan.

Manipulación precisa y segura.

Magistral en cuanto a fiabilidad, aptitud para el uso diario y estética: así es VITA VMK Master.

Ventajas

- Material sin concesiones en cuanto a seguridad y estética
- Manipulación precisa y segura, con la consiguiente facilidad de aprendizaje
- Propiedades de manipulación óptimas, tales como la mayor facilidad de modelado, la manipulación sencilla y la tendencia mínima a la contracción.
- Esquema clásico y conocido de estratificación dentina-zona incisal.
- Amplio surtido de materiales complementarios para la personalización.
- Restauraciones de gran valor estético gracias a los colores brillantes.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-Master y VITA classical A1 – D4.

VITA VMK Master® Surtidos

VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT A2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BVMKCSA2V2

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA VMK Master® STARTER SET classical
Surtido de dos colores
BVMKSSC

Cantidad	Contenido	Material
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2 - A3
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA varilla de colores A2
1		VITA varilla de colores A3

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT 2M2
Surtido monocromo para las primeras prueba
BVMKOC2M2V2

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Surtido de dos colores
BVMKSS3D

Cantidad	Contenido	Material
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2 - OP3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA varilla de colores 2M2
1		VITA varilla de colores 3M2

VITA VMK Master® Zusatzmassen

utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITA VMK Master® ADDITIONAL SET

Para añadir efectos y características naturales
BVMKAS

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T1 - T8
8	12 g	VITA VMK Master DENTINE MODIFIER DM1 - DM8
6	12 g	VITA VMK Master LUMINARY LM1 - LM6
6	12 g	VITA VMK Master MARGIN MN, M1 - M5
1	12 g	VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	12 g	VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT OT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1		Guía de colores VITA VMK MASTER TRANSLUCENT
1		Guía de colores VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA
1		Guía de colores VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY



VITA VMK Master® GINGIVA SET POWDER

Materiales gingivales de aspecto natural
BVMKGS

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	VITA VMK Master GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Guía de colores VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA

VITA VMK Master® Productos

VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
A1	B483015
A2	B483025
A3	B483035
A3.5	B483045
A4	B483055
B1	B483065
B2	B483075
B3	B483085
B4	B483095
C1	B483105
C2	B483115
C3	B483125
C4	B483135
D2	B483145
D3	B483155
D4	B483165

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
A1	B4840112	B4840150	B48401250
A2	B4840212	B4840250	B48402250
A3	B4840312	B4840350	B48403250
A3.5	B4840412	B4840450	-
A4	B4840512	B4840550	-
B1	B4840612	B4840650	-
B2	B4840712	B4840750	-
B3	B4840812	B4840850	-
B4	B4840912	B4840950	-
C1	B4841012	B4841050	-
C2	B4841112	B4841150	-
C3	B4841212	B4841250	-
C4	B4841312	B4841350	-
D2	B4841412	B4841450	-
D3	B4841512	B4841550	-
D4	B4841612	B4841650	-

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B4843112	B4843150
A2	B4843212	B4843250
A3	B4843312	B4843350
A3.5	B4843412	B4843450
A4	B4843512	B4843550
B1	B4843612	B4843650
B2	B4843712	B4843750
B3	B4843812	B4843850
B4	B4843912	B4843950
C1	B4844012	B4844050
C2	B4844112	B4844150
C3	B4844212	B4844250
C4	B4844312	B4844350
D2	B4844412	B4844450
D3	B4844512	B4844550
D4	B4844612	B4844650

VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
A1	EN1	B4845112	B4845150	B48451250
A2	EN1	B4845212	B4845250	B48452250
A3	EN1	B4845312	B4845350	B48453250
A3.5	EN2	B4845412	B4845450	B48454250
A4	EN2	B4845512	B4845550	-
B1	EN2	B4845612	B4845650	B48456250
B2	EN2	B4845712	B4845750	B48457250
B3	EN2	B4845812	B4845850	-
B4	EN2	B4845912	B4845950	-
C1	EN2	B4846012	B4846050	B48460250
C2	EN2	B4846112	B4846150	B48461250
C3	EN1	B4846212	B4846250	B48462250
C4	EN1	B4846312	B4846350	-
D2	EN2	B4846412	B4846450	B48464250
D3	EN2	B4846512	B4846550	-
D4	EN2	B4846612	B4846650	-

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
0M1	EN1	B4803112	B4803150	-
0M2	EN1	B4803212	B4803250	-
0M3	EN1	B4803312	B4803350	-
1M1	EN1	B4803412	B4803450	B48034250
1M2	EN1	B4803512	B4803550	B48035250
2L1.5	EN1	B4803612	B4803650	B48036250
2L2.5	EN1	B4803712	B4803750	-
2M1	EN1	B4803812	B4803850	B48038250
2M2	EN1	B4803912	B4803950	B48039250
2M3	EN1	B4804012	B4804050	-
2R1.5	EN1	B4804112	B4804150	-
2R2.5	EN1	B4804212	B4804250	B48042250
3L1.5	EN1	B4804312	B4804350	-
3L2.5	EN1	B4804412	B4804450	-
3M1	EN1	B4804512	B4804550	-
3M2	EN1	B4804612	B4804650	B48046250
3M3	EN1	B4804712	B4804750	-

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
3R1.5	EN1	B4804812	B4804850	-
3R2.5	EN3	B4804912	B4804950	-
4L1.5	EN1	B4805012	B4805050	-
4L2.5	EN1	B4805112	B4805150	-
4M1	EN1	B4805212	B4805250	-
4M2	EN3	B4805312	B4805350	-
4M3	EN3	B4805412	B4805450	-
4R1.5	EN1	B4805512	B4805550	-
4R2.5	EN3	B4805612	B4805650	-
5M1	EN1	B4805712	B4805750	-
5M2	EN3	B4805812	B4805850	-
5M3	EN3	B4805912	B4805950	-

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
0M1	B4806112	B4806150
0M2	B4806212	B4806250
0M3	B4806312	B4806350
1M1	B4806412	B4806450
1M2	B4806512	B4806550
2L1.5	B4806612	B4806650
2L2.5	B4806712	B4806750
2M1	B4806812	B4806850
2M2	B4806912	B4806950
2M3	B4807012	B4807050
2R1.5	B4807112	B4807150
2R2.5	B4807212	B4807250
3L1.5	B4807312	B4807350
3L2.5	B4807412	B4807450
3M1	B4807512	B4807550
3M2	B4807612	B4807650
3M3	B4807712	B4807750
3R1.5	B4807812	B4807850
3R2.5	B4807912	B4807950
4L1.5	B4808012	B4808050
4L2.5	B4808112	B4808150
4M1	B4808212	B4808250
4M2	B4808312	B4808350
4M3	B4808412	B4808450

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
4R1.5	B4808512	B4808550
4R2.5	B4808612	B4808650
5M1	B4808712	B4808750
5M2	B4808812	B4808850
5M3	B4808912	B4808950

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
OP0	B4825012	B4825050	-
OP1	B4825112	B4825150	B48251250
OP2	B4825212	B4825250	B48252250
OP3	B4825312	B4825350	B48253250
OP4	B4825412	B4825450	-
OP5	B4825512	B4825550	-

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
OP0	B483505
OP1	B483515
OP2	B483525
OP3	B483535
OP4	B483545
OP5	B483555

**VITA VMK Master® Zusatzmassen
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4**
VITA VMK Master TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
T1	B4809112	-	-
T2	B4809212	-	-
T3	B4809312	-	-
T4	B4809412	B4809450	B48094250
T5	B4809512	-	-
T6	B4809612	-	-
T7	B4809712	-	-
T8	B4809812	-	-

VITA VMK Master DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
DM1	B4812112
DM2	B4812212
DM3	B4812312
DM4	B4812412
DM5	B4812512
DM6	B4812612
DM7	B4812712
DM8	B4812812

VITA VMK Master LUMINARY, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
LM1	B4814112
LM2	B4814212
LM3	B4814312
LM4	B4814412
LM5	B4814512
LM6	B4814612

VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
PLT1	B4815112

VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
OT1	B4817112

VITA VMK Master WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4818112	B4818150	B48181250

VITA VMK Master ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

VITA VMK Master CERVICAL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
CE1	B4820112
CE2	B4820212
CE3	B4820312

VITA VMK Master CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
COR1	B4822112
COR2	B4822212

VITA VMK Master GINGIVA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
G1	B4823112
G2	B4823212
G3	B4823312
G4	B4823412
G5	B4823512

VITA VMK Master NECK, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
N1	B4824112
N2	B4824212
N3	B4824312
N4	B4824412
N5	B4824512

VITA VMK Master WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B4825912	B4825950

VITA VMK Master MARGIN, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
MN	B4826012
M1	B4826112
M2	B4826212
M3	B4826312
M4	B4826412
M5	B4826512

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
GOL	B4827112
GOD	B4827312

VITA VMK Master WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
WO	B483597

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
GOL	B483715
GOD	B483735

VITA NP BOND

Amortiguador eficaz del CET entre la cerámica y la aleación metálica



Descripción del producto

Bonder para mayor seguridad y para una estética mejorada en trabajos de recubrimiento de aleaciones dentales sin metales nobles. Gracias a la unión fiable entre la estructura de metal y la cerámica de recubrimiento (p. ej. VITA VMK MASTER y VITA VM 13), VITA NP BOND ayuda a evitar errores derivados de las diferencias de CET entre aleación y cerámica.

VITA NP BOND (NP: non precious, "no noble" en inglés) mejora la unión entre la estructura de metal y la cerámica de recubrimiento especialmente en el caso de las aleaciones sin metales nobles y, de este modo, proporciona a los protésicos mayor seguridad en la confección de recubrimientos estéticos y estables a largo plazo.

Ventajas

- Amortiguador eficaz del CET entre la cerámica y la aleación metálica, sobre todo en caso de aleaciones sin metales nobles, para una unión estable entre la estructura y la cerámica
- Seguridad cromática mejorada
- Ahorro de tiempo al no tener que hacer la cocción WASH OPAQUE
- Gracias a la mejora de la estructura superficial después de la cocción del Bonder, es más fácil aplicar el opáquer y el resultado es mejor y más uniforme.

VITA NP BOND Productos

VITA NP BOND

Denominación	Ref.
VITA NP BOND PASTE, 5 g	BNPB5

VITA LUMEX® AC

Fidelidad cromática óptima. Dinámica lumínica excelente. Precisión de manipulación



Descripción del producto

- VITA LUMEX AC es un sistema de recubrimiento de cerámica vítrea reforzada con leucita con una innovadora fórmula de material que proporciona resultados cromáticamente fieles, expresivos y fiables.
- VITA LUMEX AC abarca:
- Materiales GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE y ENAMEL, así como múltiples materiales de efectos (p. ej., OPAL TRANSLUCENT y FLUO INTENSE, entre muchos otros)
- Componentes de sistema perfectamente coordinados entre sí, como pinceles, soportes de cocción, material de glaseado, etc.

Ventajas

- Reproducción fiable de los colores dentales y de un juego de colores y luces natural, gracias a los materiales cerámicos con excelente fidelidad cromática y una dinámica lumínica impecable.
- Manipulación eficiente y precisa de la cerámica de recubrimiento gracias a las propiedades de modelado óptimas, a la excelente estabilidad de la forma y a la compatibilidad universal con todas las cerámicas para estructuras.
- Confección de restauraciones estables gracias a la elevada resistencia a la rotura, basada en la matriz de cerámica vítrea reforzada con leucita y en una unión fiable a la estructura.

Indicaciones

VITA LUMEX AC es un sistema de recubrimiento de cerámica vítrea reforzada con leucita para el recubrimiento de todos los materiales de estructuras de cerámica integral de uso habitual (dióxido de circonio, disilicato de litio y cerámica de feldespato) y de estructuras de titanio. Para la confección de reconstrucciones sin estructura (p. ej., carillas).

Indicaciones

Campos de aplicación:

- Recubrimiento completo y parcial de dióxido de circonio
- Recubrimiento completo y parcial de disilicato de litio
- Recubrimiento completo y parcial de titanio de los grados 1 - 5
- Recubrimiento parcial de cerámica de feldespato
- Reconstrucción sin estructura

Materiales:

- Estructuras de dióxido de circonio (CET aprox. 10,0 a 10,5 x 10-6 K-1)
- Estructuras de cerámica vítrea (CET aprox. 9,0 a 10,5 x 10-6 K-1)
- Estructuras de titanio (CET aprox. 9,0 a 10,5 x 10-6 K-1)

VITA LUMEX® AC Surtidos

VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®

**VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA classical A1-D4®
BLPWKC**

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH A1 - D4
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

**VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4®
Para el recubrimiento estándar
BLSKCV1**

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - D4
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pincel de pintura n° 3/0 sintético
1		pincel de estratificación n° 8 sintético
1		Bases de cocción G (envase de 2 bases y 20 pernos)

VITA LUMEX® AC STARTER KIT VITA classical A1-D4®

**Para la iniciación
BLSTKCV1**

Cantidad	Contenido	Material
4	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
4	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, waterdrop, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino
2	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pincel de pintura n° 3/0 sintético
1		pincel de estratificación n° 8 sintético
1		Bases de cocción G (envase de 2 bases y 20 pernos)

VITA LUMEX® AC masas adicionales



VITA LUMEX® AC CUT-BACK KIT

**Para el recubrimiento cut back y el microrrecubrimiento
BLCBK**

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA LUMEX® AC EXPERT KIT
Para el recubrimiento personalizado
BLEK

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut
5	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino, sand, sesame
5	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER cloudy-white, caramel, honey, copper, brown
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC MAMELON saffron, honey-melon
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA LUMEX® AC GINGIVA KIT
Para la reconstrucción de porciones gingivales
BLGK

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	VITA LUMEX AC GINGIVA pale-papilla, light-rose, nectarine, grapefruit, rosewood, purple, deep-red, dark-red
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
BLPWK3D

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH LL 1 - LL 5
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Para el recubrimiento estándar

BLSKV1

Cantidad	Contenido	Material
29	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
29	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pincel de pintura n° 3/0 sintético
1		pincel de estratificación n° 8 sintético
1		Bases de cocción G (envase de 2 bases y 20 pernos)

VITA LUMEX® AC Productos

VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B5343112	B5343150
A2	B5343212	B5343250
A3	B5343312	B5343350
A3.5	B5343412	B5343450
A4	B5343512	B5343550
B1	B5343612	B5343650
B2	B5343712	B5343750
B3	B5343812	B5343850
B4	B5343912	B5343950
C1	B5344012	B5344050
C2	B5344112	B5344150
C3	B5344212	B5344250
C4	B5344312	B5344350
D2	B5344412	B5344450
D3	B5344512	B5344550
D4	B5344612	B5344650

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B5345112	B5345150
A2	B5345212	B5345250
A3	B5345312	B5345350
A3.5	B5345412	B5345450
A4	B5345512	B5345550
B1	B5345612	B5345650
B2	B5345712	B5345750
B3	B5345812	B5345850
B4	B5345912	B5345950
C1	B5346012	B5346050
C2	B5346112	B5346150
C3	B5346212	B5346250
C4	B5346312	B5346350
D2	B5346412	B5346450
D3	B5346512	B5346550
D4	B5346612	B5346650

VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B5346712	B5346750
A2	B5346812	B5346850
A3	B5346912	B5346950
A3.5	B5347012	-
A4	B5347112	-
B1	B5347212	B5347250
B2	B5347312	-
B3	B5347412	-
B4	B5347512	-
C1	B5347612	-
C2	B5347712	-
C3	B5347812	-
C4	B5347912	-
D2	B5348012	-
D3	B5348112	-
D4	B5348212	-

VITA LUMEX® AC masas adicionales
VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
smoky-white	B5309112
light-blonde	B5309212
misty-rose	B5309312
sunlight	B5309412
sun-intense	B5309512
waterdrop	B5309612
deep-blue	B5309712
foggy-grey	B5309812

VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
cloudy-white	B5312112
caramel	B5312212
honey	B5312312
copper	B5312412
brown	B5312512

VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
arctic-white	B5314112
cream	B5314212
cappuccino	B5314312
sand	B5314412
sesame	B5314512

VITA LUMEX AC PEARL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
shell	B5315112

VITA LUMEX AC MAMELON, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
saffron	B5316112
honey-melon	B5316212

VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
opal-neutral	B5317112
opal-sky	B5317212
opal-azure	B5317312

VITA LUMEX AC ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
clear	B5318112	B5318150
light	B5319112	B5319150
medium	B5319212	B5319250
intense	B5319312	B5319350
fog	B5320112	B5320150

VITA LUMEX AC CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
neutral	B5322112
desert	B5322212

VITA LUMEX AC GINGIVA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
pale-papilla	B5323112
light-rose	B5323212
nectarine	B5323312
grapefruit	B5323412
rosewood	B5323512
purple	B5323612
deep-red	B5323712
dark-red	B5323812

VITA LUMEX AC MARGIN, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
straw-yellow	B5326112
corn-yellow	B5326212

VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
ivory	B5351112

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
0M1	B5303112	B5303150
0M2	B5303212	B5303250
0M3	B5303312	B5303350
1M1	B5303412	B5303450
1M2	B5303512	B5303550
2L1.5	B5303612	B5303650
2L2.5	B5303712	B5303750
2M1	B5303812	B5303850
2M2	B5303912	B5303950
2M3	B5304012	B5304050
2R1.5	B5304112	B5304150
2R2.5	B5304212	B5304250
3L1.5	B5304312	B5304350
3L2.5	B5304412	B5304450
3M1	B5304512	B5304550
3M2	B5304612	B5304650
3M3	B5304712	B5304750
3R1.5	B5304812	B5304850
3R2.5	B5304912	B5304950
4L1.5	B5305012	B5305050
4L2.5	B5305112	B5305150
4M1	B5305212	B5305250
4M2	B5305312	B5305350
4M3	B5305412	B5305450
4R1.5	B5305512	B5305550
4R2.5	B5305612	B5305650
5M1	B5305712	B5305750
5M2	B5305812	B5305850
5M3	B5305912	B5305950

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
0M1	B5306112	B5306150
0M2	B5306212	B5306250
0M3	B5306312	B5306350
1M1	B5306412	B5306450

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
1M2	B5306512	B5306550
2L1.5	B5306612	B5306650
2L2.5	B5306712	B5306750
2M1	B5306812	B5306850
2M2	B5306912	B5306950
2M3	B5307012	B5307050
2R1.5	B5307112	B5307150
2R2.5	B5307212	B5307250
3L1.5	B5307312	B5307350
3L2.5	B5307412	B5307450
3M1	B5307512	B5307550
3M2	B5307612	B5307650
3M3	B5307712	B5307750
3R1.5	B5307812	B5307850
3R2.5	B5307912	B5307950
4L1.5	B5308012	B5308050
4L2.5	B5308112	B5308150
4M1	B5308212	B5308250
4M2	B5308312	B5308350
4M3	B5308412	B5308450
4R1.5	B5308512	B5308550
4R2.5	B5308612	B5308650
5M1	B5308712	B5308750
5M2	B5308812	B5308850
5M3	B5308912	B5308950

VITA LUMEX AC OPAQUE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
opaque-0	B5325012
opaque-1	B5325112
opaque-2	B5325212
opaque-3	B5325312
opaque-4	B5325412
opaque-5	B5325512

VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
LL 0	B5353012	B5353050
LL 1	B5353112	B5353150
LL 2	B5353212	B5353250
LL 3	B5353312	B5353350
LL 4	B5353412	-
LL 5	B5353512	-

VITAVM®11

Cerámica de estructura fina para la personalización de VITA SUPRINITY PC*



Descripción del producto

VITA VM 11 es una cerámica de feldespato de estructura fina de bajo punto de fusión, especialmente desarrollada para la personalización de restauraciones de cerámica vítrea de silicato de litio reforzada con dióxido de circonio. La coordinación óptima entre ambos rangos CET garantiza una unión sin tensiones y por ende segura.

En combinación con VITA SUPRINITY PC, y gracias a la excelente humectabilidad de la superficie de la nueva cerámica vítrea, se puede iniciar directamente el recubrimiento, prescindiendo de la cocción de liner o wash.

El alto grado de translucidez y la coloración cálida de VITA VM 11, en combinación con el efecto opalescente de VITA SUPRINITY PC, se traducen en resultados de excelente estética con un juego cromático natural.

Ventajas

- Efecto cromático natural y dinámica lumínica gracias a la estructura fina.
- Excelente unión para obtener resultados seguros.
- Facilidad de manipulación para lograr rápidamente resultados altamente estéticos.
- Posee unas propiedades de cocción excelentes y conserva la estabilidad de su forma incluso después de varias cocciones.
- Extraordinaria facilidad de modelado que permite la aplicación rápida y precisa de la cerámica.
- Proceso de trabajo eficiente y económico.
- Personalizable mediante VITA AKZENT Plus y VITA INTERNO.
- Seguridad de proceso basada en muchos años de experiencia.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-Master y VITA classical A1 – D4.

Nota

* También puede utilizarse para CELTRA® y CELTRA® CAD FC. CELTRA es una marca registrada de DeguDent GmbH.

VITAVM®11 Surtidos

VITAVM®11 VITA classical A1-D4®



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA classical A1-D4®
BV11DKC**

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, A1 - A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
BV11DK**

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1 - 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 Productos
VITAVM®11 VITA classical A1-D4®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g
A1	ENL	B4945112
A2	ENL	B4945212
A3	ENL	B4945312
A3.5	END	B4945412
B2	END	B4945712
C2	END	B4946112
D2	END	B4946412

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g
0M1	ENL	B4906112
1M1	ENL	B4906412
1M2	ENL	B4906512
2M2	ENL	B4906912
3M2	ENL	B4907612
4M2	END	B4908312

VITAVM®11 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 11 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EE1	B4909112
EE3	B4909312
EE5	B4909512
EE7	B4909712
EE8	B4909812
EE9	B4909912
EE11	B4910112

VITA VM 11 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EC1	B4912112
EC5	B4912512
EC11	B4913112

VITA VM 11 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EP1	B4915112

VITA VM 11 MAMELON, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
MM1	B4916112
MM3	B4916312

VITA VM 11 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
E01	B4917112
E02	B4917212
E03	B4917312
E05	B4917512

VITA VM 11 WINDOW, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
WIN	B4918112

VITA VM 11 ENAMEL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
ENL	B4919112
END	B4919212

VITA VM 11 NEUTRAL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
NT	B4920112

VITA VM 11 SUN DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
SD1	B4936112
SD2	B4936212
SD3	B4936312

VITAVM®9

Cerámica de recubrimiento de feldespato natural de estructura fina para estructuras de dióxido de circonio y VITABLOCS Mark II



Descripción del producto

VITA VM 9 es una cerámica de feldespato de estructura fina altamente estética perfectamente adaptada al CET de las estructuras de dióxido de circonio (aprox. 10,5, como p. ej. VITA YZ), con total independencia de si es blanca, coloreada o translúcida.

Además, puede utilizar el material VITA VM 9 para la personalización de restauraciones confeccionadas a partir de VITABLOCS Mark II.

Sus componentes principales son feldespatos potásicos y sódicos puros, los cuales aportan un efecto cromático brillante y unas propiedades físicas óptimas, entre ellas unos valores máximos de resistencia a la flexión.

La superficie homogénea y lisa de VITA VM 9 facilita extraordinariamente las tareas de desbastado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada in situ. De este modo se consiguen superficies lisas y bien selladas.

Se reduce sensiblemente la adhesión de placa a la superficie de la cerámica, lo cual facilita al paciente el cuidado de la restauración de alta calidad.

VITA VM 9 es un componente de gran calidad del innovador sistema VITA VM: la solución universal para todas las indicaciones habituales. Ya se trate de metalocerámica, cerámica sin metal o composite: las posibilidades son ilimitadas.

Para el acabado personalizado dispone de los maquillajes VITA AKZENT Plus y VITA INTERNO.

Ventajas

- Efecto cromático natural, dinámica lumínica y propiedades físicas óptimas gracias a la estructura fina.
- Excelente unión para obtener resultados seguros y éxito a largo plazo.
- La mínima tendencia a la contracción reduce la necesidad de repetir cocciones.
- Extraordinaria facilidad de modelado que permite la aplicación rápida y precisa de la cerámica.
- Amplia oferta de materiales complementarios para lograr unos efectos fotoópticos excelentes.
- Personalizable mediante VITA AKZENT Plus y VITA INTERNO.
- Seguridad de proceso basada en muchos años de experiencia.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-Master y VITA classical A1 – D4

VITAVM®9 Surtidos

VITAVM®9 VITA classical A1-D4®



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®
Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
BV9BUK12CV1

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT A2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV9OCCA2V4

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITAVM®9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
BV9BUK12V1

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT 2M2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV9OCK2M2V5

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITAVM®9 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC
Surtido complementario para la personalización de VITABLOCS
BV9EKC2

Cantidad	Contenido	Material
1		VITABLOCS Mark II Sample Set VITA SYSTEM 3D-MASTER
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO2
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Base de cocción W alveolar para coronas y puentes
1		2 Pernos de platino (1 perno para diente anterior y 1 para diente posterior)



VITAVM®9 GINGIVA KIT
Materiales gingivales de aspecto natural
BV9GKV1

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	VITA VM 9 GINGIVA G1 - G5
1		Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 MARGIN KIT
Sólo para pequeñas correcciones en la zona marginal
BV9MKV1

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	VITA VM 9 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 PROFESSIONAL KIT
Para añadir efectos y características naturales
BV9PKV2

Cantidad	Contenido	Material
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 9 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Guía de colores VITA VM EFFECT CHROMA
1		Guía de colores VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Guía de colores VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®9 Productos

VITAVM®9 VITA classical A1-D4®

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	ENL	B4243112	B4243150
A2	ENL	B4243212	B4243250
A3	ENL	B4243312	B4243350
A3.5	END	B4243412	B4243450
A4	END	B4243512	B4243550
B1	END	B4243612	B4243650
B2	END	B4243712	B4243750
B3	END	B4243812	B4243850
B4	END	B4243912	B4243950
C1	END	B4244012	B4244050
C2	END	B4244112	B4244150
C3	ENL	B4244212	B4244250
C4	ENL	B4244312	B4244350
D2	END	B4244412	B4244450
D3	END	B4244512	B4244550
D4	END	B4244612	B4244650

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	ENL	B4245112	B4245150
A2	ENL	B4245212	B4245250
A3	ENL	B4245312	B4245350
A3.5	END	B4245412	B4245450
A4	END	B4245512	B4245550
B1	END	B4245612	B4245650
B2	END	B4245712	B4245750
B3	END	B4245812	B4245850
B4	END	B4245912	B4245950
C1	END	B4246012	B4246050
C2	END	B4246112	B4246150
C3	ENL	B4246212	B4246250
C4	ENL	B4246312	B4246350
D2	END	B4246412	B4246450
D3	END	B4246512	B4246550
D4	END	B4246612	B4246650

VITAVM[®] 9 VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]
VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
0M1	ENL	B4203112	B4203150
0M2	ENL	B4203212	B4203250
0M3	ENL	B4203312	B4203350
1M1	ENL	B4203412	B4203450
1M2	ENL	B4203512	B4203550
2L1.5	ENL	B4203612	B4203650
2L2.5	ENL	B4203712	B4203750
2M1	ENL	B4203812	B4203850
2M2	ENL	B4203912	B4203950
2M3	ENL	B4204012	B4204050
2R1.5	ENL	B4204112	B4204150
2R2.5	ENL	B4204212	B4204250
3L1.5	ENL	B4204312	B4204350
3L2.5	ENL	B4204412	B4204450
3M1	ENL	B4204512	B4204550
3M2	ENL	B4204612	B4204650
3M3	ENL	B4204712	B4204750

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
3R1.5	ENL	B4204812	B4204850
3R2.5	ENL	B4204912	B4204950
4L1.5	END	B4205012	B4205050
4L2.5	END	B4205112	B4205150
4M1	END	B4205212	B4205250
4M2	END	B4205312	B4205350
4M3	END	B4205412	B4205450
4R1.5	END	B4205512	B4205550
4R2.5	END	B4205612	B4205650
5M1	END	B4205712	B4205750
5M2	END	B4205812	B4205850
5M3	END	B4205912	B4205950

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
0M1	ENL	B4206112	B4206150
0M2	ENL	B4206212	B4206250
0M3	ENL	B4206312	B4206350
1M1	ENL	B4206412	B4206450
1M2	ENL	B4206512	B4206550
2L1.5	ENL	B4206612	B4206650
2L2.5	ENL	B4206712	B4206750
2M1	ENL	B4206812	B4206850
2M2	ENL	B4206912	B4206950
2M3	ENL	B4207012	B4207050
2R1.5	ENL	B4207112	B4207150
2R2.5	ENL	B4207212	B4207250
3L1.5	ENL	B4207312	B4207350
3L2.5	ENL	B4207412	B4207450
3M1	ENL	B4207512	B4207550
3M2	ENL	B4207612	B4207650
3M3	ENL	B4207712	B4207750
3R1.5	ENL	B4207812	B4207850
3R2.5	ENL	B4207912	B4207950
4L1.5	END	B4208012	B4208050
4L2.5	END	B4208112	B4208150
4M1	END	B4208212	B4208250
4M2	END	B4208312	B4208350
4M3	END	B4208412	B4208450

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 12 g	Ref. 50 g
4R1.5	END	B4208512	B4208550
4R2.5	END	B4208612	B4208650
5M1	END	B4208712	B4208750
5M2	END	B4208812	B4208850
5M3	END	B4208912	B4208950

VITAVM®9 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EE1	B4209112
EE2	B4209212
EE3	B4209312
EE4	B4209412
EE5	B4209512
EE6	B4209612
EE7	B4209712
EE8	B4209812
EE9	B4209912
EE10	B4210012
EE11	B4210112

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EC1	B4212112
EC2	B4212212
EC3	B4212312
EC4	B4212412
EC5	B4212512
EC6	B4212612
EC7	B4212712
EC8	B4212812
EC9	B4212912
EC10	B4213012
EC11	B4213112

VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EL1	B4214112
EL2	B4214212
EL3	B4214312
EL4	B4214412
EL5	B4214512
EL6	B4214612

VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EP1	B4215112
EP2	B4215212
EP3	B4215312

VITA VM 9 MAMELON, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
MM1	B4216112
MM2	B4216212
MM3	B4216312

VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
E01	B4217112
E02	B4217212
E03	B4217312
E04	B4217412
E05	B4217512

VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

VITA VM 9 EFFECT BONDER, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB3	B4221312
EB4	B4221412
EB5	B4221512

VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
COR1	B4222112
COR2	B4222212
COR3	B4222312

VITA VM 9 GINGIVA, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
G1	B4223112
G2	B4223212
G3	B4223312
G4	B4223412
G5	B4223512

VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
CP1	B4224112
CP2	B4224212
CP3	B4224312
CP4	B4224412
CP5	B4224512

VITA VM 9 MARGIN, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
M1	B4226112
M4	B4226412
M5	B4226512
M7	B4226712
M8	B4226812
M9	B4226912

VITA VM 9 ADD-ON, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
ADD1	B4229112
ADD2	B4229212
ADD3	B4229312
ADD4	B4229412
ADD5	B4229512
ADD6	B4229612
ADD7	B4229712
ADD8	B4229812

VITA VM 9 SUN DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
SD1	B4236112
SD2	B4236212
SD3	B4236312

VITAVM® LC

Composite de micropartículas fotopolimerizable para uso extraoral en restauraciones fijas y removibles



Descripción del producto

VITAVM® LC & VITAVM® LC flow

Uso sencillo. Resultados económicos y estéticos. Múltiples posibilidades: la familia de productos VITA VM LC ofrece todo lo que usted espera de un composite de recubrimiento para la elaboración extraoral de restauraciones.

Independientemente de que utilice el composite en pasta o los materiales flow de baja viscosidad, o de que los combine a su elección: con VITA VM LC siempre conseguirá unos resultados brillantes. Muy próximos a la cerámica y, sin duda alguna, siempre de forma sistemática.

Ventajas

- Dos formas de elaboración para unas posibilidades prácticamente ilimitadas
- Perfectamente adaptado a todas las indicaciones
- Estética brillante con una excelente reproducción cromática basada en la receta de colores original de VITA
- Extraordinarias propiedades de los materiales
- Gama modular de productos basada en sistemas para unas posibilidades de diseño eficientes

Indicaciones

Indicaciones:

- Recubrimiento total y parcial de estructuras metálicas: coronas, puentes, coronas telescópicas, supraconstrucciones de implantes
- Inlays, carillas

Ámbitos de aplicación:

- Personalización y estratificación de VITA ENAMIC
- Recubrimiento de estructuras de ZrO₂ parcialmente estabilizado con itrio (CET aprox. 10,5 · 10-6 · K-1), como p. ej., VITA YZ
- Personalización de dientes de resina VITA
- Reproducción de porciones gingivales
- Recubrimiento de prótesis removibles y parcialmente removibles (conforme a las instrucciones del fabricante) de
 - estructuras de poliéter éter cetona (PEEK) con hasta un 20 % de rellenocerámico, como p. ej., BioHPP/Bredent
 - polímero PEEK-OPTIMA® LT1, p. ej., Juvora, InnoBlanc Medical

Restauraciones provisionales de larga duración:

- Personalización y estratificación de restauraciones provisionales de larga duración confeccionadas con VITA CAD-Temp
- Coronas sin metal y puentes de tres piezas para dientes anteriores confeccionados con VITA VM LC

Colores

Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® y VITA classical A1–D4®

VITAVM® LC Surtidos

VITAVM® LC VITA classical A1-D4®



VITAVM®LC combi TEST KIT A3

Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE paste / ENAMEL & masas adicionales flow)

CVLCCTKA3

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Soporte para pinceles blanco
1		Puntas de pincel desechables, 50 uds.
1		Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja
1		VITA varilla de colores A3



VITAVM®LC flow TEST KIT A3

Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE, ENAMEL & masas adicionales flow)

CVLCFTKA3

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1		Soporte para pinceles blanco
1		Puntas de pincel desechables, 50 uds.
1		Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja
1		VITA varilla de colores A3



VITAVM® LC paste TEST KIT A3
Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE, ENAMEL & masas adicionales paste)
CVLCPTKA3

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Soporte para pinceles blanco
1		Puntas de pincel desechables, 50 uds.
1		VITA varilla de colores A3

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM® LC combi TEST KIT 2M2
Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE paste / ENAMEL & masas adicionales flow)
CVLCCTK2M2

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Soporte para pinceles blanco
1		Puntas de pincel desechables, 50 uds.
1		VITA varilla de colores 2M2
1		Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja

VITAVM®LC flow TEST KIT 2M2

Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE, ENAMEL & masas adicionales flow)

CVLCFTK2M2

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Soporte para pinceles blanco
1		Puntas de pincel desechables, 50 uds.
1		Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja
1		VITA varilla de colores 2M2



VITAVM®LC paste TEST KIT 2M2

Surtido monocromo para las primeras pruebas (DENTINE, ENAMEL & masas adicionales paste)

CVLCPTK2M2

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Soporte para pinceles blanco
1		Puntas de pincel desechables, 50 uds.
1		VITA varilla de colores 2M2
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL

VITAVM®LC masas adicionales
 utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITAVM®LC flow CHROMA KIT
Surtido para el aumento de la intensidad cromática en la zona de cervical y central
CVLCFCHK

Cantidad	Contenido	Material
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1		Guía de colores VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC flow GINGIVA KIT
Surtido para la reconstrucción de la gingiva
CVLCFGK

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1 - G5
1		Guía de colores VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT
Para añadir efectos y características naturales
CVLCFPKV1

Cantidad	Contenido	Material
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1 - EE2, EE5 - EE7, EE9, EE11 - EE12
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		Guía de colores VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC paste GINGIVA KIT
Surtido para la reconstrucción de la gingiva
CVLCPGK

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
4	4 g	VITA VM LC GINGIVA G1 - G2, G4 - G5
1		Guía de colores VITA VM INDIVIDUAL

VITAVM®LC PRIMER

VITA VM LC PRIMER I, 5 ml
CVMLP014

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

VITA VM LC PRIMER II, 5 ml

CVMLP024

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITA VM®LC PRIMER SET

CVMLPSET

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITAVM® LC Productos
VITAVM® LC VITA classical A1-D4®

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 4 g
A1	ENL	C444314
A2	ENL	C444324
A3	ENL	C444334
A3.5	END	C444344
A4	END	C444354
B2	ENL	C444374
B3	END	C444384
B4	END	C444394
C1	END	C444404
C2	ENL	C444414
C3	END	C444424
C4	END	C444434
D2	END	C444444
D3	END	C444454
D4	END	C444464

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 4 g
A1	ENL	C44431F4
A2	ENL	C44432F4
A3	ENL	C44433F4
A3.5	END	C44434F4
A4	END	C44435F4
B2	END	C44437F4
B3	END	C44438F4
B4	END	C44439F4
C1	END	C44440F4
C2	ENL	C44441F4
C3	END	C44442F4
C4	END	C44443F4
D2	END	C44444F4
D3	END	C44445F4
D4	END	C44446F4

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
A1	C443013
A2	C443023
A3	C443033
A3.5	C443043
A4	C443053
B2	C443073
B3	C443083
B4	C443093
C1	C443103
C2	C443113
C3	C443123
C4	C443133
D2	C443143
D3	C443153
D4	C443163

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 4 g
0M1	ENL	C440314
1M1	ENL	C440344
1M2	ENL	C440354
2L1.5	ENL	C440364
2L2.5	ENL	C440374
2M1	ENL	C440384
2M2	ENL	C440394
2M3	ENL	C440404
2R1.5	ENL	C440414
2R2.5	ENL	C440424
3L1.5	ENL	C440434
3L2.5	ENL	C440444
3M1	ENL	C440454
3M2	ENL	C440464
3M3	ENL	C440474
3R1.5	ENL	C440484
3R2.5	ENL	C440494
4L1.5	END	C440504

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 4 g
4L2.5	END	C440514
4M1	END	C440524
4M2	END	C440534
4M3	END	C440544
4R1.5	END	C440554
4R2.5	END	C440564
5M1	END	C440574
5M2	END	C440584
5M3	END	C440594

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 4 g
0M1	ENL	C44031F4
1M1	ENL	C44034F4
2M1	ENL	C44038F4
2M2	ENL	C44039F4
2M3	ENL	C44040F4
3M2	ENL	C44046F4
3M3	ENL	C44047F4
3R2.5	ENL	C44049F4

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
0M1	C445013
1M1	C445043
1M2	C445053
2L1.5	C445063
2M1	C445083
2M2	C445093
2M3	C445103
3L1.5	C445133
3M2	C445163
3M3	C445173
3R2.5	C445193
4M2	C445233

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Denominación	Ref. 10 g

Denominación	Ref. 10 g
0M1	C4400110
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

VITAVM® LC masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
CP1	C442414
CP2	C442424
CP3	C442434
CP4	C442444
CP5	C442454

VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
EE12	C441024
EE2	C440924
EE6	C440964
EE9	C440994

VITA VM LC ENAMEL, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
END	C441924
ENL	C441914

VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
CP1	C44241F3
CP2	C44242F3
CP3	C44243F3
CP4	C44244F3
CP5	C44245F3

VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
EE1	C44091F3
EE11	C44101F3
EE12	C44102F3
EE2	C44092F3
EE5	C44095F3
EE6	C44096F3
EE7	C44097F3
EE9	C44099F3

VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
END	C44192F4
ENL	C44191F4

VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
G1	C44231F3
G2	C44232F3
G3	C44233F3
G4	C44234F3
G5	C44235F3

VITA VM LC flow NEUTRAL, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
NT	C44201F4

VITA VM LC flow WINDOW, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
WIN	C44181F3

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g


Denominación	Ref. 3 g
GOL	C443713

VITA VM LC GINGIVA, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
G1	C442314
G2	C442324
G4	C442344
G5	C442354

VITA VM LC NEUTRAL, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
NT	C442014


Denominación		Ref.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID, 5 ml Líquido de opáquer		CVML0L5

VITA VM LC PAINT, 2 g

Denominación	Ref. 2 g
PT1	C444012
PT12	C444122
PT13	C444132
PT15	C444152
PT17	C444172
PT19	C444192
PT3	C444032
PT5	C444052
PT8	C444082
PT9	C444092

VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
PRE	C445913

Denominación		Ref.
VITAVM®LC PAINT KIT Materiales de color intenso		CVLCPAKV4

VITAVM® LC PRIMER

El VITA VM LC PRIMER es un agente adhesivo para composites de recubrimiento fotopolimerizables.



Descripción del producto

El VITA VM LC PRIMER es un agente adhesivo para el acondicionamiento de la superficie.

Las dos fases del VITA VM LC PRIMER garantizan la unión fiable entre composites de recubrimiento y materiales de estructuras dentales.

Los VITA VM LC PRIMER I y II también pueden utilizarse por separado según el material específico. No obstante, su combinación proporciona una unión adhesiva aún mejor. Tenga en cuenta a este respecto nuestras indicaciones recomendadas.

El VITA VM LC PRIMER complementa el composite de micropartículas fotopolimerizable VITA VM LC para la confección extraoral de restauraciones.

Ventajas

- Mayor rentabilidad gracias a la variedad de indicaciones
- Fiabilidad gracias a la elevada unión adhesiva
- Seguridad en el proceso gracias a su sencilla manipulación

Indicaciones

- Adhesión de superficies de estructuras metálicas (aleaciones no preciosas, aleaciones preciosas, titanio) a resinas/composites basados en (met)acrilato.
- Adhesión de superficies de estructuras de ZrO_2 a resinas/composites basados en (met)acrilato.
- Adhesión de resinas/composites reticulados como VITA CAD Temp o de polímeros de alto rendimiento (PEEK, PEKK).

VITAVM® LC PRIMER Surtidos

VITAVM® LC PRIMER

**VITA VM LC PRIMER I, 5 ml
CVMLP014**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

**VITA VM LC PRIMER II, 5 ml
CVMLP024**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

**VITA VM® LC PRIMER SET
CVMLPSET**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITAVM[®]CC

Material autopolimizable sin material de relleno añadido, indicado para la confección extraoral



Descripción del producto

VITA VM CC es un material polimerizable en frío sin material de relleno añadido. Es ideal para la confección extraoral de prótesis provisionales.

VITA VM CC se caracteriza por unas excelentes propiedades de manipulación, como un comportamiento de mezcla y su excepcional fluidez facilitan el procesamiento.

Gracias a la facilidad de pulido y a la homogénea estructura del material, se limitan las acumulaciones de placa en un alto grado. La superficie lisa de la prótesis provisional le proporciona una sensación agradable al paciente y le ofrece mayor comodidad.

Ventajas

- Extraordinarias propiedades de fluidez
- Excelente comportamiento de mezcla
- Facilidad de pulido
- Mayor estabilidad cromática que otros sistemas comparables
- Excelente estabilidad del material y menor riesgo de fractura gracias al ajuste perfecto entre resistencia a la flexión y módulo de elasticidad
- Reducción considerable de las acumulaciones de placa
- Fraguado sin formación de burbujas, fuera o dentro de la cámara de presión

Indicaciones

- Confección de coronas y puentes provisionales
- Fijación de dientes de resina VITA, p. ej., en esqueléticos
- Reparaciones
- Recubrimiento de conectores en prótesis combinadas

Colores

Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A1–D4

VITAVM® CC Surtidos

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®



VITA VM CC ONE COLOR KIT A2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
CVCCOCKA2

Cantidad	Contenido	Material
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE A2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuchara graduada, de plástico
1		VITA varilla de colores A2

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM® CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Surtido básico para la estratificación BASIC
CVCCBK16

Cantidad	Contenido	Material
16	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuchara graduada, de plástico
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM® CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC
CVCCBK5

Cantidad	Contenido	Material
5	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuchara graduada, de plástico
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITA VM CC ONE COLOR KIT 2M2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
CVCCOCK2M2

Cantidad	Contenido	Material
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 2M2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Cuchara graduada, de plástico
1		VITA varilla de colores 2M2

VITAVM®CC masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT
Para añadir efectos y características naturales
CVCCPK

Cantidad	Contenido	Material
5	30 g	VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6

VITAVM® CC Productos

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 30 g	Ref. 100 g
A1	ENL	C4743130	C47431100
A2	ENL	C4743230	C47432100
A3	ENL	C4743330	C47433100
A3.5	END	C4743430	C47434100
A4	END	C4743530	C47435100
B2	END	C4743730	C47437100
B3	END	C4743830	C47438100
B4	END	C4743930	-
C1	END	C4744030	-
C2	END	C4744130	C47441100
C3	ENL	C4744230	C47442100
C4	ENL	C4744330	-
D2	END	C4744430	-
D3	END	C4744530	C47445100
D4	END	C4744630	-

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominación	Asignación del esmalte	Ref. 30 g	Ref. 100 g
0M1	ENL	C4703130	C47031100
1M1	ENL	C4703430	C47034100
2L1.5	ENL	C4703630	C47036100
2M1	ENL	C4703830	C47038100
2M2	ENL	C4703930	C47039100
2M3	ENL	C4704030	C47040100
3L1.5	ENL	C4704330	C47043100
3L2.5	ENL	C4704430	C47044100
3M1	ENL	C4704530	C47045100
3M2	ENL	C4704630	C47046100
3M3	ENL	C4704730	C47047100
3R1.5	ENL	C4704830	C47048100
3R2.5	ENL	C4704930	C47049100
4L1.5	END	C4705030	C47050100
4M2	END	C4705330	C47053100
5M1	END	C4705730	C47057100

VITAVM® CC masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g

Denominación	Ref. 30 g
EL2	C4714230
EL3	C4714330
EL4	C4714430
EL5	C4714530
EL6	C4714630

VITA VM CC WINDOW, 30 g

Denominación	Ref. 30 g
WIN	C4718130

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g

Denominación	Ref. 30 g	Ref. 100 g
ENL	C4719130	C47191100
END	C4719230	C47192100

Denominación	Ref.
VITA VM CC LIQUID, 100 ml	CVCCCL100
VITA VM CC LIQUID, 30 ml	CVCCCL30

Accesorios para Material de recubrimiento



Descripción del producto

Los accesorios para la material de recubrimiento facilitan la manipulación de estos materiales.










Accesorios para Material de recubrimiento Surtidos


Accesorios para Material de recubrimiento

**VITA CERAMIC SAMPLE KIT
BCST**

Cantidad	Contenido	Material
1		Bases de cocción G, 1 unidad
1		VITA cuarzo en polvo
1		VITA Ceramic Sample Tool

Accesorios para Material de recubrimiento Productos
Accesorios para Material de recubrimiento

Denominación		Ref.
Bases de cocción G (envase de 2 bases y 20 pernos) 55 x 45 x 6 mm, con 52 orificios para Pernos de inserción		B009N
Algodones de soporte de cocción, 2 uds.		B017N
Pernos de inserción para bases de cocción G (paquete de 50 uds.)		B023
VITA Espátula de vidrio para colores		B055
VITA Modisol® Lápiz aislante con 2 puntas (cerámica contra yeso)		B075N
Nº 3 Pincel de aplicación de pelo de marta roja		B087
Nº E 0 Pincel para pintar		B093
Base de cocción W alveolar para coronas y puentes		B201N
Pernos de platino para soporte de cocción W, 6 uds.		B207N
Kit de sondas de plata VITA Para la comprobación de la temperatura en el horno de cerámica Contiene 6 zócalos de cerámica y 3 sondas de plata de 70 mm de longitud y 1,5 mm Ø		B230
Paleta de mezclado VITA INTERNO de plástico (Ø 144 mm, con cavidades) Deckel ohne Bedruckung		B252
Paleta de mezclado VITA AKZENT Plus de cristal (70 x 95 mm)		B255V1
Pincel plano, para PASTE OPAQUE		B297
Guía de colores VITA VM EFFECT CHROMA EC1-EC11		B414
Guía de colores VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL EE1-EE11, EP1-EP3		B416
Guía de colores VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11		B419
Guía de colores VITA VM INDIVIDUAL Para confeccionar muestras de colores individuales		B423

Denominación		Ref.
Guía de colores VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T1-T8, OT1, PLT1		B431
Guía de colores VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD		B432
Guía de colores VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY DM1-DM8, LM1-LM6		B433
Guía de colores VITA VMK MASTER STANDARD N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2		B434
Guía de colores VITA VM 9 ADD-ON ADD1 - ADD8		B435
VITA AKZENT Plus Disco de muestras de colores		B436
Paleta de mezclado VITA AKZENT Plus de plástico (Ø 144 mm, con cavidades)		B437
Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN G1-G5, GOL, GOD, M1-M9		B439
Guía de colores VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON EL1-EL6, E01-E05, MM1-MM3		B440
VITA INTERNO Disco de muestras de colores		B444

Denominación	Ref.
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, muestra de color classical	B455
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, muestra de color 3D-MASTER	B458





Líquidos para Material de recubrimiento









Descripción del producto

Líquidos de modelado para una estabilidad excelente durante la estratificación de cerámicas dentales.

Líquidos para Material de recubrimiento Productos
Líquidos para Material de recubrimiento

Denominación		Ref.
VITA MODELLING LIQUID 30M, 250 ml Para el mezclado de los polvos de dentina y esmalte para el modelado de larga duración de las cerámicas VITA con una temperatura de cocción superior a 900°C		B30M250
VITA MODELLING LIQUID 30M, 50 ml Para el mezclado de los polvos de dentina y esmalte para el modelado de larga duración de las cerámicas VITA con una temperatura de cocción superior a 900°C		B30M50
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID, 50 ml Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al 30%		BHSML50
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 250 ml		BLML250
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 50 ml		BLML50
VITA MODELLING FLUID, 250 ml Líquido de modelado estándar Para el mezclado de los materiales VITA VM 13, VMK Master y TITANKERAMIK		BMF250
VITA MODELLING FLUID, 50 ml Líquido de modelado estándar Para el mezclado de los materiales VITA VM 13, VMK Master y TITANKERAMIK		BMF50
VITA MODELLING FLUID RS, 250 ml Líquido de modelado especial para modelado de larga duración Para mezclar todos los materiales de dentina, incisales y complementarios. Su consistencia maleable permite una manipulación prolongada y húmeda al tiempo que garantiza una buena estabilidad. Por lo tanto, este líquido es idóneo para restauraciones de grandes dimensiones y puentes de varias piezas.		BMFRS250
VITA MODELLING FLUID RS, 50 ml Líquido de modelado especial para modelado de larga duración Para mezclar todos los materiales de dentina, incisales y complementarios. Su consistencia maleable permite una manipulación prolongada y húmeda al tiempo que garantiza una buena estabilidad. Por lo tanto, este líquido es idóneo para restauraciones de grandes dimensiones y puentes de varias piezas.		BMFRS50
VITA VM MODELLING LIQUID, 250 ml Líquido de modelado estándar Para el mezclado de los materiales VITA VM 7, VM 9, VM 13 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL y EFFECT		BML250N
VITA VM MODELLING LIQUID, 50 ml Líquido de modelado estándar Para el mezclado de los materiales VITA VM 7, VM 9, VM 13 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL y EFFECT		BML50N
VITA OPAQUE FLUID, 250 ml Para mezclar los opaquer y los bonder Para el mezclado de opaquers VITA VMK Master y TITANKERAMIK		BOF250

Denominación		Ref.
VITA OPAQUE FLUID, 50 ml Para mezclar los opaquer y los bonder Para el mezclado de opaquers VITA VMK Master y TITANKERAMIK		BOF50
VITA VM PASTE FLUID, 15 ml Para modificar la consistencia de OPAQUE PASTE y COLOR OPAQUE PASTE Para el mezclado de las pastas VITA VM 13 y VM 15 OPAQUE		BPF15V1
VITA PASTE OPAQUE LIQUID, 15 ml Para modificar la consistencia de los opaquers en pasta VITA y los materiales de adhesivo en pasta		BPOL15
VITA Aislamiento de muñones, 16 ml Aislamiento (cerámica contra yeso) para las técnicas cerámicas VITA (excepto la cerámica de titanio)		BSI16
VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID, 50 ml Líquido de mezcla especial para cerámica de bajo punto de fusión Líquido para el mezclado de los VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, SUN DENTINE, ENAMEL y materiales complementarios		BVMLF50
VITA VM OPAQUE FLUID, 250 ml Para el mezclado de opaque powder Para el mezclado de los polvos VITA VM 13 y VM 15 OPAQUE		BVMOF250
VITA VM OPAQUE FLUID, 50 ml Para el mezclado de opaque powder Para el mezclado de los polvos VITA VM 13 y VM 15 OPAQUE		BVMOF50

Líquidos para Resina de recubrimiento

Denominación		Ref.
VITA AKZENT LC CLEANER, 25 ml		CALCC25
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Solución limpiadora		CVMLC50
VITA VM LC GEL, 20 ml Bloqueador de la capa de inhibición		CVMLG20
VITA VM LC MODELLING LIQUID, 10 ml Líquido de modelado		CVMLM10
Modeling liquid Líquido de modelado		CVMLM30
VITA VM LC SEPARATOR, 30 ml Aislamiento de modelo		CVMLS30

Accesorios para Resina de recubrimiento





Descripción del producto

Los accesorios para la resina de recubrimiento facilitan la manipulación de estos materiales.

Accesorios para Resina de recubrimiento Productos

Accesorios para Resina de recubrimiento

Denominación		Ref.
Cuchara graduada, de plástico		C006
VITA Paleta de mezclado negra de porcelana con tapa, 8,5 x 11 cm		C014
Cuchara graduada, 0,1 ml / Espátula de amasar 2 caras		C017
VITA Paleta de mezclado negra de porcelana con tapa, 5,5 x 3,5 cm		C018
Soporte para pinceles blanco		FCPHW
Puntas de pincel desechables, 50 uds.		FCPS

VITA SPRAY-ON



Descripción del producto

VITA SPRAY-ON es para la pulverización de opaques dentales cerámicos en polvo sobre estructuras metálicas.

El opáquer se aplica de modo uniforme mediante una pistola pulverizadora conectada al aire comprimido. Los opaques mezclados pueden conservarse en los frascos de cristal suministrados hasta consumirlos por completo.

Para la conexión a equipos de aspiración se adjuntan plantillas con distintos radios.

Ventajas

- gran ahorro de tiempo
- una capa de opáquer uniforme y muy fina en general
- adherencia óptima del opáquer a las estructuras metálicas
- considerable reducción de costes

VITA SPRAY-ON Surtidos

VITA SPRAY-ON

**VITA SPAY-ON Sortiment / Assortment
B101V3**

Cantidad	Contenido	Material
13		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, OP0
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, OP1
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, OP2
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, OP3
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, OP4
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, OP5
1		VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío, WO
1		Etiquetas VITA classical A1-D4 (16 unidades)
1		VITA SPRAY-ON Tapa adaptadora, incluye juntas de obturación, 6 uds
1		VITA SPRAY-ON Pistola pulverizadora con tapa de protección
1		VITA SPRAY-ON Aguja de repuesto para la pistola pulverizadora
1		VITA SPRAY-ON guías de aguja de teflón, 2 uds.
1		VITA Espátula de vidrio para colores
1		VITA SPRAY-ON Soporte doble para pistolas pulverizadoras
1		VITA SPRAY-ON Tubo flexible de presión con refuerzo textil
1		VITA SPRAY-ON Tubo flexible de conexión, espiral
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Frasco dispensador vacío
1		VITA SPRAY-ON Rotulador (resistente al alcohol)
1		VITA SPRAY-ON Reductor de presión completo con soporte mural

VITA SPRAY-ON Productos**VITA SPRAY-ON**

Denominación	Ref.
VITA SPRAY-ON Frasco de cristal vacío	B103
VITA SPRAY-ON Tapa adaptadora, incluye juntas de obturación, 6 uds	B104
VITA SPRAY-ON Pistola pulverizadora con tapa de protección	B105N
VITA SPRAY-ON Aguja de repuesto para la pistola pulverizadora	B106
VITA SPRAY-ON Reductor de presión completo con soporte mural	B107N
VITA SPRAY-ON Soporte doble para pistolas pulverizadoras	B108
VITA SPRAY-ON guías de aguja de teflón, 2 uds.	B109N
VITA SPRAY-ON Tubo flexible de presión con refuerzo textil	B110
VITA SPRAY-ON Tubo flexible de conexión, espiral	B111
VITA SPRAY-ON Liquid, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid, 250 ml	B113
VITA SPRAY-ON Frasco dispensador vacío, 250 ml	B114
VITA SPRAY-ON Tapa de protección para pistola pulverizadora	B115N
VITA SPRAY-ON Rotulador (resistente al alcohol)	B116
VITA SPRAY-ON Juntas de obturación para cable adaptador, 10 uds.	B210

VITA Modulbox

Sistema de armario de material sintético



Descripción del producto

The VITA MODULBOX is a modular A3-sized system for long-term, clearly-arranged and material-appropriate storage of VITA products in laboratories and dental practices.


See also the vario tooth cabinet.

VITA Modulbox Productos

VITA Modulbox



Denominación		Ref.
VITA Modulbox cajón de 20 mm con corredera y campos para 2 etiquetas		ZMB20
VITA Modulbox cajón de 55 mm con corredera y campos par 2 etiquetas		ZMB55
VITA Modulbox cajón de 80 mm con corredera y campos para 2 etiquetas		ZMB80
VITA Modulbox partes inferiores / superiores sin corredera, incl. accesorios		ZMBBD
Caja de almacenamiento para VITABLOCS for CEREC con 1 cajón de 80 mm, con inserto nº 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Caja completa nº 1 con 1 cajón de 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Caja completa nº 2 con 2 cajones de 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Caja completa nº 3 con 1 cajón de 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Caja completa nº 4 con 2 cajones de 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox separadore sin corredera, incl. 3 tapones de montaje		ZMBZ

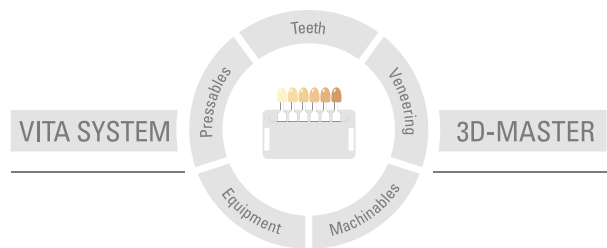

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 04.2024

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik