
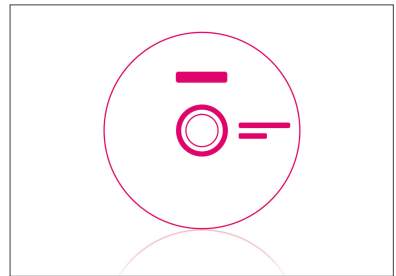
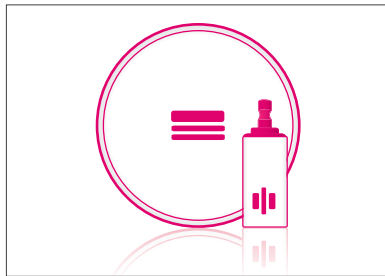
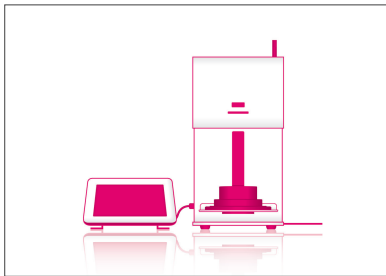
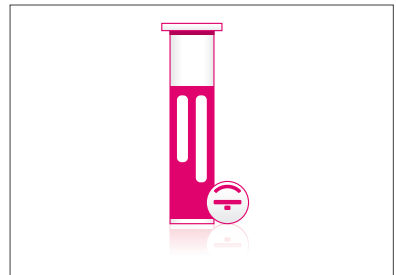


VITA Kompendium April 2024

Befestigung

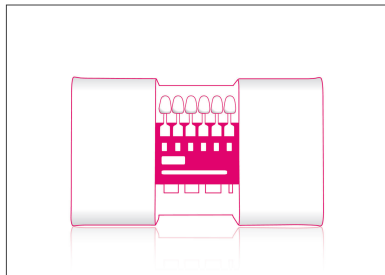

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

Das volladhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung von Zahnschmelz und Restaurationen



Produktbeschreibung

Das volladhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung von Zahnschmelz und Restaurationen.

Für die Befestigung aller indirekten Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall geeignet.

Vorteile

- Vielfältige Restaurationswerkstoffe mit materialspezifisch abgestimmten Haftvermittlern verlässlich befestigen.
- Dank des übersichtlichen Befestigungssets mit systematisch angeordneten und farblich gekennzeichneten Komponenten prozesssicher befestigen.
- Mit dem handlichen, zweiteiligen Set im Normtrayformat alle Komponenten stets griffbereit zur Hand.

Inhalte

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH

Ist ein 37%-iges Phosphorsäure-Ätzgel für das Ätzen von Zahnschmelz zur adhäsiven Befestigung von Restaurationen an natürlicher Zahnschmelz. Geeignet für die Total- und Selective-Etch-Technik.

VITA ADIVA® T-BOND I+II

Ist ein dualhärtendes Bonding-System. VITA ADIVA T-BOND ermöglicht einen guten Verbund zwischen Befestigungskomposit und geätztem Schmelz sowie Dentin.

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Ist ein 5%-iges Flußsäure-Gel und dient dem Ätzen von Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, um eine mikromechanische Verankerung zwischen Restauration und Befestigungskomposit zu erzielen. Nur für den extraoralen Gebrauch bestimmt!

VITA ADIVA® C-PRIME

VITA ADIVA C-PRIME ist ein Haftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik und Befestigungskomposit.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Ist ein Haftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen gesinterten Restaurationen aus Zirkondioxid und Befestigungskomposit.

VITA ADIVA® M-PRIME

Ist ein Haftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen abgestrahlten Restaurationen aus Titan, Nichtelegierungsmetall-Legierungen, Edelmetall-Legierungen und Befestigungskomposit.

VITA ADIVA® F-CEM

Ist ein dualhärtendes, volladhäsives Befestigungskomposit und dient der definitiven Befestigung von Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Ist ein farbneutrales Glycerin-Gel zur Vermeidung der Sauerstoff-Inhibitionsschicht bei der adhäsiven Befestigung. Kann auch als Try-In Paste eingesetzt werden.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE Sortimente

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET

**VITA ADIVA FULL-ADHESIVE SET
FAFASV1**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA ADIVA F-CEM A2 Universal
1	transparent	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Packung Einweg-Applikationskanülen
1	3 ml	VITA ADIVA TOOTH-ETCH
2	20 Stück	Einweg-Applikationskanülen blau für TOOTH-ETCH, rot für CERA ETCH
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND I
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND II
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA F-CEM, 5 ml

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 ml
A2 Universal	FAFCEMA25
A3	FAFCEMA35
Translucent	FAFCEMT5
White opaque	FAFCEMW05

VITA ADIVA® COMPONENTS

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml 5%-iges Flußsäure-Gel	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml 5%-iges Flußsäure-Gel	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Keramik-Primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Metall-Primer	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 Stück

Bezeichnung	Art.-Nr. 10 Stück
3 ml inkl. 1 Packung Einweg-Applikationskanülen, transparent	FAOP3V1

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Dualhärtendes Adhesiv-System	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) 37%-iges Phosphorsäure-Ätzgel	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Zirkonoxid- Primer	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

Das selbstadhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung des Restaurationsmaterials



Produktbeschreibung

Das selbstadhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung des Restaurationsmaterials.

Für die Befestigung aller indirekten Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall geeignet.

Vorteile

- Vielfältige Restaurationswerkstoffe mit materialspezifisch abgestimmten Haftvermittlern verlässlich befestigen.
- Dank des übersichtlichen Befestigungssets mit systematisch angeordneten und farblich gekennzeichneten Komponenten prozesssicher befestigen.
- Mit dem handlichen, zweiteiligen Set im Normtrayformat alle Komponenten stets griffbereit zur Hand.

Inhalte

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Ist ein 5 %iges Flußsäure-Gel und dient dem Ätzen von Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, um eine mikromechanische Verankerung zwischen Restauration und Befestigungskomposit zu erzielen. Nur für den extraoralen Gebrauch bestimmt!

VITA ADIVA® C-PRIME

VITA ADIVA C-PRIME ist ein Haftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik und Befestigungskomposit..

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Ist ein Haftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen gesinterten Restaurationen aus Zirkondioxid und Befestigungskomposit.

VITA ADIVA® M-PRIME

Ist ein Haftvermittler und bewirkt einen chemischen Verbund zwischen abgestrahlten Restaurationen aus Titan, Nichtedelmetall-Legierungen, Edelmetall-Legierungen und Befestigungskomposit.

VITA ADIVA® S-CEM

Ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungskomposit und dient der definitiven Befestigung von Kronen und Brücken aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid sowie Metall.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Ist ein farbneutrales Glycerin-Gel zur Vermeidung der Sauerstoff-Inhibitionsschicht bei der adhäsiven Befestigung. Kann auch als Try-In Paste eingesetzt werden.

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Sortimente

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET

**VITA ADIVA SELF-ADHESIVE SET
FASASV1**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA ADIVA S-CEM A2 Universal
1	transparent	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Packung Einweg-Applikationskanülen
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	20 Stück	Einweg-Applikationskanülen rot für CERA ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 4:1

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA S-CEM, 5 ml

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 ml
A2 Universal	FASCEMA25
Translucent	FASCEMT5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml 5%-iges Flußsäure-Gel	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml 5%-iges Flußsäure-Gel	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Keramik-Primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Metall-Primer	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 Stück

Bezeichnung	Art.-Nr. 10 Stück
3 ml inkl. 1 Packung Einweg-Applikationskanülen, transparent	FAOP3V1

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Dualhärtendes Adhesiv-System	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) 37%-iges Phosphorsäure-Ätzgel	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Zirkonoxid- Primer	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® TE-CEM



Produktbeschreibung

VITA ADIVA TE-CEM ist ein dualhärtender Kunststoffzement für die temporäre Befestigung.

Er ist in der Farbe Translucent erhältlich.

VITA ADIVA® TE-CEM Artikel

VITA ADIVA® TE-CEM

VITA ADIVA TE-CEM, 5 ml

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 ml
Translucent	FATECEM5

VITA ADIVA® IA-CEM

Ultraopake Befestigungslösung für die Implantatversorgung



Produktbeschreibung

VITA ADIVA IA-CEM ist ein ultraopakes, stark maskierendes, dualhärtendes Befestigungskomposit für die Implantatprothetik.

Es dient der definitiven, adhäsiven Befestigung von (Abutment-) Kronen und Mesostrukturen auf Titanklebebasen und individuellen Titan- sowie Zirkondioxidabutments.

Zum Befestigungskomposit gibt es materialspezifisch abgestimmte Haftvermittler für einen beständigen Verbund zwischen Restauration und Abutment.

VITA ADIVA® IA-CEM Sortimente

VITA ADIVA® IA-CEM

VITA ADIVA® IA-CEM SET

VITA ADIVA® IA-CEM SET

FAIACEMSET


Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Artikel

VITA ADIVA® IA-CEM

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

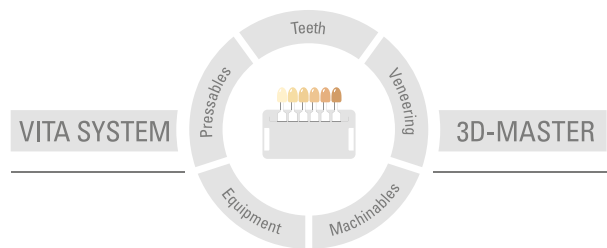

Stand dieser Information: 04-2024

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik